

PRODUKTÖVERSIKT



Small, för sår upp till 45 x 30mm.
Vikbar avtappning med ficka
Antal: **10**
Produktkod: **839250**
Apotekens Varunr: **204976**



Medium, för sår upp till 110 x 75 mm.
Vikbar avtappning med ficka
Antal: **10**
Produktkod: **839251**
Apotekens Varunr: **204977**



Large, för sår upp till 175 x 110 mm.
Vikbar avtappning med ficka
Antal: **10**
Produktkod: **839252**
Apotekens Varunr: **204978**



XL, för sår upp till 245 x 160 mm.
Horisontell. Vikbar avtappning
med ficka
Antal: **5**
Produktkod: **839253**
Apotekens Varunr: **204979**



Small, för sår upp till 45 x 30mm.
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning
Antal: **10**
Produktkod: **839260**
Apotekens Varunr: **204980**



Small +, för sår upp till 86x60 mm
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning
Antal: **10**
Produktkod: **839267**
Apotekens Varunr: **732128**



Medium, för sår upp till 110 x 75mm.
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning
Antal: **10**
Produktkod: **839261**
Apotekens Varunr: **204981**



Large, för sår upp till 175 x 110 mm.
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning
Antal: **10**
Produktkod: **839262**
Apotekens Varunr: **204983**



XL, för sår upp till 245 x 160 mm.
Horisontell. Koppling till
urinuppsamlingspåse med inbyggd
propp för stängning
Antal: **5**
Produktkod: **839263**
Apotekens Varunr: **204984**



XL, för sår upp till 245 x 160 mm.
Horisontell. Koppling till
urinuppsamlingspåse med inbyggd
propp för stängning. Öppningsbar
lucka.
Antal: **5**
Produktkod: **839264**
Apotekens Varunr: **204985**



XL, för sår upp till 245 x 160 mm.
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning.
Vertikal
Antal: **5**
Produktkod: **839265**
Apotekens Varunr: **204986**



XL, för sår upp till 245x160 mm
Koppling till urinsuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning.
Vertikal. Öppningsbar lucka
Antal: **5**
Produktkod: **839268**
Apotekens Varunr: **732129**



XL, för sår upp till 290 x 130 mm.
Koppling till urinuppsamlingspåse
med inbyggd propp för stängning.
Vertikal, avlång och oregelbunden
Antal: **5**
Produktkod: **839266**
Apotekens Varunr: **204987**



Maxi
Två tömningskanaler
250 x 385 mm
Antal: **1**
Produktkod: **839269**
Apotekens Varunr: **733400**



Eakin Lucka
Antal: **5**
Produktkod: **839280**
Apotekens Varunr: **204988**



Eakin Hudskydd Platta
Antal: **5**
Produktkod: **839003** (100 x 200 mm)
Apotekens Varunr: **280792**
Produktkod: **839004** (100 x 100 mm)
Apotekens Varunr: **280800**

eakin®



eakin®



Manufactured in Northern Ireland by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, Comber,
County Down, BT23 5QY
www.eakin.eu

 **mcare**

M Care AB
Pilgården
237 91 BJÄRRED
Tel/Fax: 046-29 24 00
E-mail: info@mcare.se
www.mcare.se

Wound POUCHES™

EGENSKAPER & FÖRDELAR

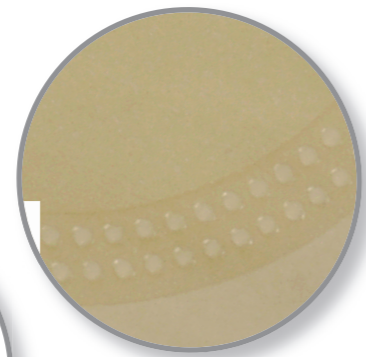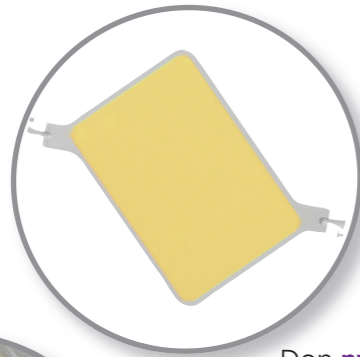

Speciell svetsteknik gör plattan **mer flexibel** så att den enkelt följer kroppens form.



Transparent plast ger möjlighet till inspektion av såret utan att påsen måste avlägsnas.

Den **nya MAXI påsen** är den största Sår & Fistelpåsen på marknaden!



Eakin Sårpåsar finns i **många storlekar**, lämpliga för små barn ända upp till större postoperativa sår.



Plattan på påsarna består av Eakin Hudskydd. Huden får ett maximalt skydd mot uttömningar som annars skulle skada huden. Perfekt passform oavsett var på kroppen påsen placeras. Eakin Hudskydd är mycket **hudvänligt**.

Eakin Sårpåsar är speciellt utformade för att ge en bekväm, hudvänlig, kostnadseffektiv och tidsbesparande möjlighet att behandla alla typer av sår och fistlar.

ANVÄNDNING

Två tömningsmetoder:

- Tömningskanal med ficka
- Koppling till dränerings/ uppsamlingspåse med inbyggd propp.



På plattans baksida finns tydlig markering för yttersta klippgräns. En transparent **klippmall** medföljer. Rita av såret på klippmallen för exakt passform.



Eakin Lucka kan klistras på de flesta av Eakin Sårpåsar. Luckan ger tillträde till såret vid behov av rensning eller spolning.



EAKIN LUCKA

Den unika Eakin Luckan ger **snabb och enkel tillgänglighet till såret** utan att hela bandaget måste tas av. Luckan kan öppnas och stängas efter behov.

Eakin Lucka passar på många olika påsar och kan fästas i den riktning eller vinkel som passar bäst. En av de större påsarna har inbyggd lucka.

Eakin Lucka fästs **snabbt och enkelt** på påsen. Öppna luckan och klipp hål i påsen. Den ovala formen gör tillgängligheten till såret smidig.

EAKIN HUDSKYDD PLATTOR

Eakin Hudskydd finns som plattor i två olika storlekar. Vid behov kan de ge ett kompletterande **hudskydd** i samverkan med Eakin Sårpåsar.

Placera Eakin Hudskydd runt sårkanter eller fyll ut ojämnheter. Veck i huden kan medföra läckage och med Eakin Hudskydd som utfyllnad kan Eakin Sårpåsar **sitta säkrare och längre**.




ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Studier och patientfall finns tillgängliga på www.eakin.eu



Eakin Lucka kan förlänga påsens användningstid eftersom man får tillgång till såret utan att behöva ta av bandaget.

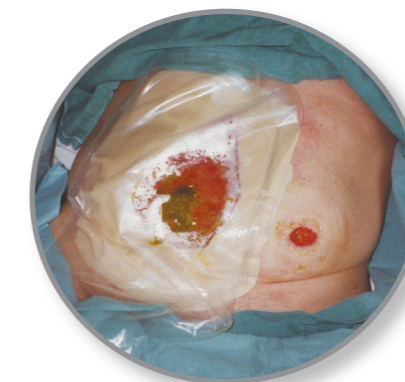

Plattan ger maximalt hudskydd. Transparent plast ger möjlighet till **inspektion av såret**. Påsen bildar en "fuktkammare" som ger gynnsamma läkningsmöjligheter.



Eakin Hudskydd kan användas för att "rama in" såret och ge **ökad skydd mot läckage**.

Wound POUCHES™