




## Horizon Clips

- titaniumclips för öppen och endoskopisk kirurgi.

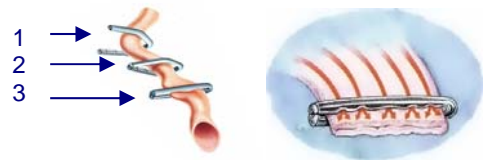

### Design

Horizon clips har en unik hästskoform som säkrar en "tip to tip" förslutning. Clipset omsluter hela kärlet innan det stängs (se bild ovan).


De spår och fåror som finns på clipets insida (se bild nedan) tillåter att kärlväggens yttersta skikt (tunica externa) förblir mikroperfunderat, vilket förhindrar vävnadsnekros och clip migration. OBS! mikroperfunderingen sker enbart i det yttersta skicket av kärlväggen, kärllumen förblir fullständigt ligerad!

I clipsens ändrar finns små rillor som gör att vävnaden inte glider ur förslutningen.

Ändarna är inte spetsiga/kantiga som på traditionella clips utan de är mer rundade. Detta förhindrar irritation på omkringliggande vävnad.

Genom Horizons clipsform, med en ränna som passar i en kanal i applikatorn käft, minimeras risken för att clippen tappas efter laddningen. En laddning som är mycket lätt och säker.

Hjärt/triangel  
formad tillböjning

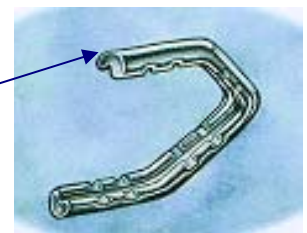

Ränna

### Magasin

Clipsen sitter i magasin som är formade så att clippen inte tappas. De är fästa på ett sådant sätt att de endast kan tas ut med en applikator. Ett säkert sätt som behåller clippen sterila. Magasinet levereras med dubbelhäftande tejp på undersidan. Härigenom kan kirurgen fästa det på ett lämpligt ställe där det är lättillgängligt.

Teleflex Medicals applikatorer för öppen- / endoskopisk kirurgi är endast framtagna för Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex Medical kan inte garantera säkerheten, om andra fabrikat av clips används i Teleflex applikatorer.



**Teleflex**

Mediplast AB  
Box 9504  
200 39 MALMÖ

mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com



Telefon: 040-671 23 00  
Fax: 040-671 23 10  
Kundtjänst: 020-78 80 35



Artikelnr.	Färg	Storlek	Antal clips/ magasin	Antal magasin	Totalt antal clips	Anmärkning
60HZ5200		Micro	6	30	180	
60HZ1200	Yellow	Small	6	30	180	
60HZ1204	Yellow	Small	24	25	600	
60HZ1201	Red	Small	6	30	180	Bred
60HZ1205	Red	Small	24	25	600	Bred
60HZ2200	Blue	Medium	6	30	180	
60HZ2204	Blue	Medium	24	25	600	
60HZ3200	Green	Medium/Large	6	20	120	
60HZ3204	Green	Medium/Large	24	15	360	
60HZ4200	Orange	Large	6	20	120	
60HZ4204	Orange	Large	24	15	360	

Teleflex Medicals applikatorer för öppen- / endoskopisk kirurgi är endast framtagna för Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex Medical kan inte garantera säkerheten, om andra fabrikat av clips används i Teleflex applikatorer.



Mediplast AB  
Box 9504  
200 39 MALMÖ

mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com



Telefon: 040-671 23 00  
Fax: 040-671 23 10  
Kundtjänst: 020-78 80 35