



# WELLION SAFETYLANCETS

SÄKERHET-ENGÅNGS-LANSETTER

wellion®



Wellion Safetylancets är designade för modern blodprovstagning.



**Wellion Safetylancets** är billiga och sterila engångslansetter som kan slängas för att förhindra stickskador och därmed förhindra infektioner efter sådana skador, särskilt i den kliniska vardagen och hälsovården.

**Wellion Safetylancets** är engångsprodukter som garanterar en säker och skonsam extraktion av kapillärblod tack vare en ultraskarp lansett. Risken för smärta för patienten minskar genom minimerade vibrationer.

Konstruktionen av **Wellion Safetylancets** är utformad på ett sådant sätt att nålen aldrig syns och är alltid (före och efter stick) gömd i ett plasthölje. Sålunda undviks risken för skador. Wellion Safetylancets ger därför **maximalt användarskydd** och bidrar till att minimera risken för skador på vårdpersonal.

Den kontaktaktiverade avtryckaren säkerställer att endast patienten kommer i kontakt med nålen. Denna lansett aktiveras när toppen av lansetten trycks direkt mot det önskade stickstället och aktiveras med ett lätt tryck av frigöringsmekanismen. Rätt avstånd mellan anordningen och huden är därför alltid ett faktum. Kroppen av lansetten används som ett handtag, att trycka på en aktiveringsknapp är inte nödvändigt.

En mekanism som består av två fjädrar, skjuter lansetten in i huden och drar nålen omedelbart efter injektionen tillbaka in i det skyddande höljet. Att använda lansetten igen är omöjligt.

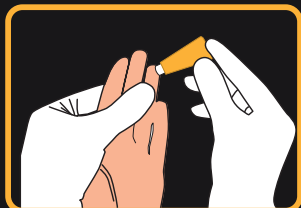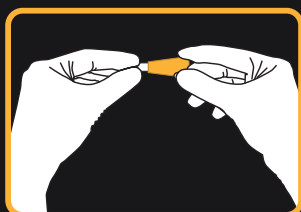

Wellion Safetylancets finns i följande varianter:

Nål	28G	23G
Djup	1,8 mm	2,2 mm
Prov	ca. 10 µl	30 - 70 µl
Idealisk för	Tunn hud och barn	Tjock och fjällig hud



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST Sweden AB  
Box 30106 • 200 61 Limhamn  
Tel.: 040 157775  
info@medtrust.se  
www.medtrust.se • www.wellion.se





# Nålsticksskador

Nålsticksskador är farliga, ofta kostsamma och kan undvikas!

wellion®

## Stick-och skärskador är en av de största farorna för personal i hälsovårdssektorn

I mars 2010 har **Europeiska unionen** satt upp **direktivet 2010/32/EU** för att **undvika skador** från vassa/spetsiga instrument i hälso-och sjukvården, som trädde i kraft i juni 2010.

**Genomförandeperioden skall vara till maj 2013.**

### Allmän information

Direktivet gäller för alla anställda inom hälso-och sjukvården och reglerar följande uppgifter:

- Specificera och införa säkra rutiner för att hantera skarpa/spetsiga medicinska instrument och förorenat avfall och för bortskaffande av detsamma. Införelse av ordentliga avfallsprocedurer och tydligt märkta, tekniskt säkra behållare för avyttring av vassa/spetsiga medicinska instrument och injektionsutrustning.
- Undvik onödig användning av vassa/spetsiga instrument genom att ändra metod baserad på resultaten av riskbedömning och använda medicintekniska produkter som innehåller säkerhets-och skyddsmekanismer.
- Förbud mot att återmontera locket på den använda nålen (förbud mot återanvändning)

Målet är att förbättra **säkerheten** för **yrkesverksamma inom sjukvården** genom en integrerad strategi för att bedöma och förebygga risker samt för att minska antalet stick-och skärskador (särskilt antalet nålsticksskador) genom användning av säkrare instrument.

Nålsticksskador eller skador från vassa instrument utsätter de drabbade för risken för överföring av smittsamma sjukdomar såsom hepatit B, hepatit C, HIV.

### Registrering av nålsticksskador

För registrering av skador från nålstick och dokumentation i säkerhets- och hälsodokument kan riktlinjer för Europeiska byrån för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen användas.