

Produktfaktblad TENA Bed

Användningsområde


TENA Bed är ett mycket komfortabelt, högabsorberande och hållfast hygienunderlägg för användning som komplementsskydd i säng, stol eller rullstol. Skyddet finns i tre absorptionsnivåer (Normal, Plus och Super) och i en rad olika storlekar.

Absorberande skikt av mjukt cellulosa som är sammanpressad för god hållfasthet och styrka under användning


TENA Bed Plus och Super har kanaler i absorptionszonen som begränsar vätskespridning

Prasselfritt spärrskikt, ligger säkert på plats under användning

Spärrkanter längs sidorna för att förhindra läckage

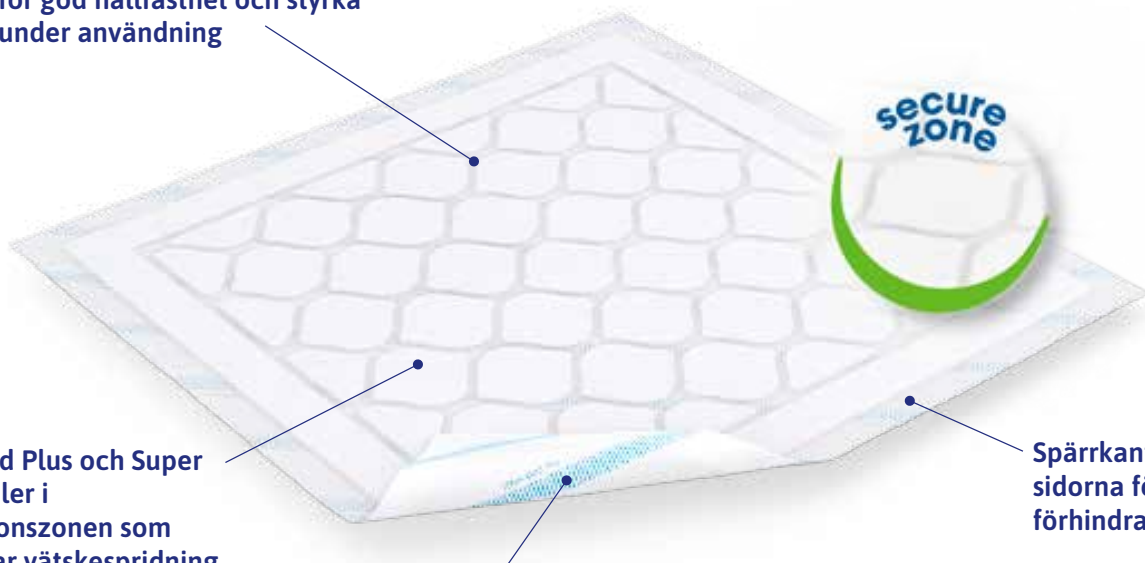

TENA Bed Plus 180x80 cm har bäddflikar

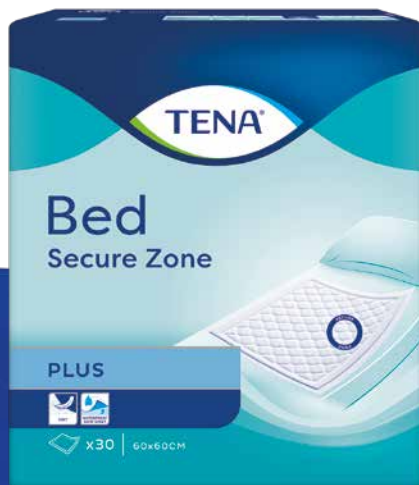

Produktfaktablad TENA Bed

Produktegenskaper

Det absorberande skiktet består av mjuk cellulosa (fluffmassa) som är sammanpressad för god hållfasthet under användning. TENA Bed Plus och Super har även superabsorbenter jämt fördelade över den absorberande ytan som snabbt kapslar in vätska, för ökad torrhet och läckagesäkerhet. Spärrkanter längs sidorna för att förhindra läckage utanför skyddet. Det prasselfria spärrskiktet på undersidan ligger väl fixerat mot underlaget.

För hög torrhet har TENA Bed Plus och Super kanaler i absorptionszonen som begränsar vätskespridning. Tack vare den höga absorptionskapaciteten har TENA Bed Plus och Super en mycket hög hållfastighet under användning. Superabsorbenten har en neutraliserande effekt på oönskad lukt.



TENA Bed Plus 180x80 cm har bäddflikar och en absorptionszon i storlek 85x75 cm.

TENA Bed SecureZone

Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart pall	Latexfri	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Praktisk absorption	Essity Art.nr
Normal									
Normal 60x60		42	40	160	12	Ja	963	321	77 00 45
Normal 60x90		65	35	140	12	Ja	1253	418	77 00 47
Plus									
Plus 60x40	✓	33	30	180	12	Ja	767	256	77 01 14
Plus 60x60	✓	53	30	120	12	Ja	1201	400	77 01 09
Plus 60x75	✓	76	25	100	16	Ja	1526	509	77 01 31
Plus 60x90	✓	80	30	120	12	Ja	1930	643	77 01 11
Plus 90x80	✓	108	20	80	8	Ja	2455	818	77 01 08
Plus 180x80	✓	127	20	80	8	Ja	2496	832	77 11 03
Super									
Super 60x60	✓	61	30	120	16	Ja	1430	477	77 02 07
Super 60x90	✓	94	26	78	12	Ja	2365	788	77 02 10

Produktfaktablad TENA Bed

Ingående material

YTMATERIAL

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden, kapsla in absorptionsmaterial.

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa. TENA Bed Plus och Super har även superabsorbenter.

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SPÄRRSIKT

Material: Polyetenplast

Funktion: Förhindra genomvätning. Säkerställa att skyddet ligger säkert på plats

TENA Bed är latexfria. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand