

Coloplast Dränagepåse

Coloplast Dränagepåse är speciellt utvecklad för dränage och fistelbandagering. Den finns steril eller osteril i tre olika storlekar – mini (100 ml), midi (300 ml) och maxi (500 ml). Samtliga med volymindikator.

Utloppet

Utloppet har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Dränagepåsen kan med fördel kopplas samman med **Conveen** sängpåse.


Volymindikator

Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymindikatorn på påsen. Det mjuka tyget på baksidan av påsen är behagligt för patienten och minimerar samtidigt risken för hudirritation. Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant.

Backventil och PVC-fri plast

Påsen har backventil som förhindrar sekretionen att rinna tillbaka. Därmed minskar risken för infektion och hudproblem. Det transparenta påsmaterialet gör det enkelt att inspektera innehållet, utan att påsen behöver tas av. Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast.



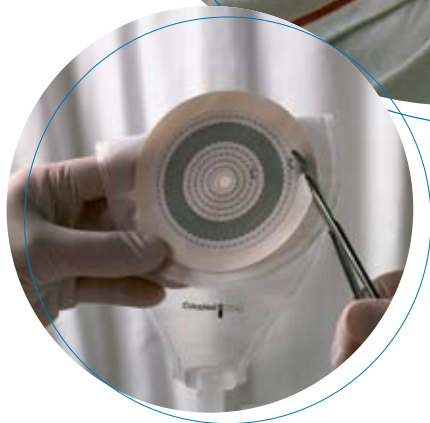

Coloplast dränagepåse

Coloplast dränagepåse	Storlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Osteril	Mini	20 00 54	022400	20	100 ml
Osteril	Midi	20 00 56	022450	20	300 ml
Osteril	Maxi	20 00 57	022500	20	500 ml

Coloplast dränagepåse	Storlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Steril	Mini	84 83 74	022100	10	100 ml
Steril	Midi	84 84 73	022150	10	300 ml
Steril	Maxi	84 85 15	022200	10	500 ml

Conveen sängpåse, tömbar	Storlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
		24 62 80	050623	30	1500 ml

Coloplast och Conveen är registrerade varumärken ägda av Coloplast A/S.
© 2008-04. Alla rättigheter tillhör Coloplast AB, Kungsbacka. Produktion: Sandstens Tryckeri. Upplag: 200 ex. SP1504.



Coloplast AB
Box 101 71
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
se@coloplast.com
www.coloplast.se

Vi gör livet lättare för människor med intima sjukvårdsbehov

Coloplast AB säljer produkter inom stomi, kontinens och urologi, vilka gör livet enklare för personer med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Att lyssna och svara på våra kunders behov, är det som driver oss och vår produktutveckling framåt. Detta sker i nära samarbete med vårdpersonal och i ständig dialog med våra slutanvändare.

Miljöfaktaruta

Avfallshantering

Förpackning: Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas. Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophöbning med energiotvinning.

Certifiering

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern, USA och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade.

CE
0543



341253 SANDSTENS TRYCKERI