

TENA®

# Produktfaktablad TENA Discreet Normal


## Användningsområde

TENA Discreet Normal är ett läckagesäkert, bekvämt och diskret skydd för mindre till måttliga urinläckage.



microPROTEX™ teknologi för ökad diskretion med samma säkerhet

Mjuk sidoelastik skålförmar skyddet för extra säkerhet och passform

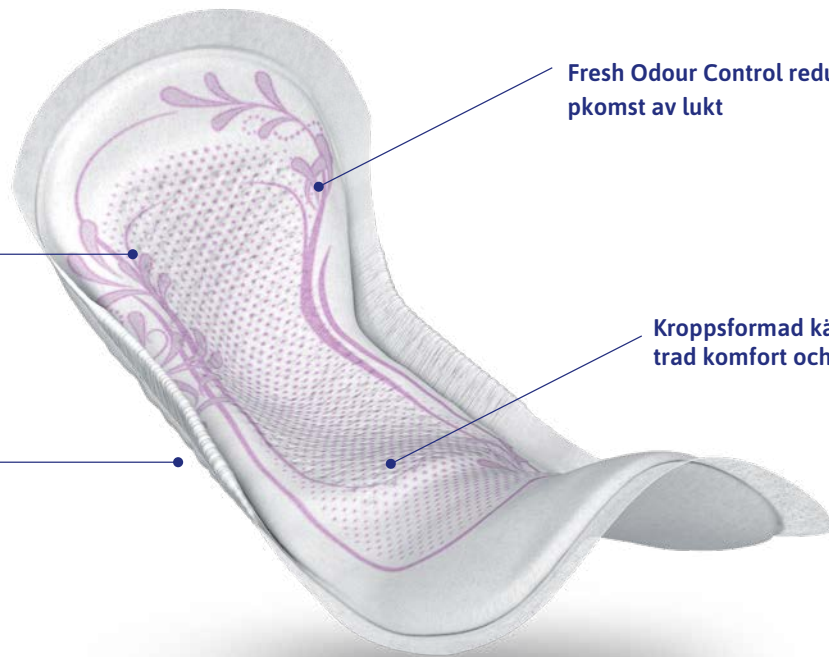

Fresh Odour Control reducerar uppkomst av lukt

Kroppsförmad kärna för förbättrad komfort och passform



Diskret enstycksförpackad enkel att ta med sig



TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

[www.tena.nu](http://www.tena.nu)

# Produktfaktablad TENA Discreet Normal

## Produktegenskaper

TENA Discreet Normal ger trippelt skydd mot läckage, lukt och fukt. Bindan är, tack vare MicroPROTEXTM teknologi, 20% tunnare med bibehållen säkerhet. Superabsorbenter kapslar snabbt in vätska och skyddet absorberar betydligt mer än en vanlig sanitetsbinda. Andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven ger ökad komfort och god hudmiljö.

TENA Discreet har Fresh Odour Control. Unika micro-fresh pärlor reducerar tillväxten av ammoniak producerande bakterier, vilket i sin tur reducerar lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produktnamn/storlek. Produkterna är diskret enstycksförpackade

TENA Discreet						
Uppsugningsnivå/storlek	Svanen-märkt	Längd cm	Antal/påse st	Antal/kart st	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal	✓	27.5	12	72	381	76 07 12

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

### ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

### ELASTIK

Material: Polyuretan

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

### SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Discreet skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)