

PRODUKTFAKTABLAD

TENA FLEX



Användningsområde

TENA Flex är ett mycket läckagesäkert och bekvämt bälteskydd framförallt för vårdtagare som behöver hjälp vid byte. Finns i fem absorptionsnivåer och i fyra storlekar : Small, Medium, Large och Extra Large, vilket möjliggör individuell utprovning.



Unikt elastiskt bälte
ComfiStretch som expanderar
och går tillbaka i harmoni med
kroppens form vid stående,
sittande och liggande position

Unik bältesförlängare
för optimal passform

Läckagebarriär för
hög säkerhet

Midjeelastik fram för
hög elasticitet och en
säker passform

Diskret
våtindikator

Hög elastik i ryggen för
bästa passform i rygglutet


Höftbältet är stabilt och
mjukt det rullar inte ihop
sig utan sitter bekvämt
under användning

Spridningsskiktet FeelDry™
kapslar snabbt in urin och
håller huden torr


Enkel att hantera
Fixeras med kardborre direkt på bältet.
Kan justeras och återförslutas flera gånger

Odour Neutralizer för neutraliserande
effekt på oönskad lukt

Användarinstruktion på skydd och förpackning
Underlättar fixering för vårdpersonal

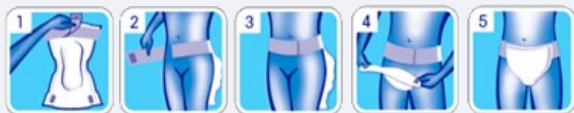

Tack vare den symmetriskt formade kärnan
absorberar TENA Flex lika bra åt båda håll.
Detta gör att den kan fixeras både bak- och
framifrån vilket ger en ergonomisk
arbetsställning för vårdpersonal och ökad
värdighet för den enskilde

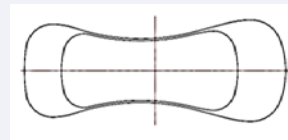

smartcare™

Anpassad för användning tillsammans med
TENA SmartCare Change Indicator

PRODUKTFAKTABLAD TENA FLEX

Produktegenskaper

TENA Flex har ett unikt elastiskt höftbälte (ComfiStretch™) som tillsammans med midjeelastik både fram¹ och bak gör att produkten har hög elasticitet och bibehåller sin säkra passform under hela användningstiden, även vid lägesförändring. Höftbältet är stabilt, komfortabelt och mjukt, vilket gör att det bibehåller sin form under användning och rullar inte ihop sig utan sitter bekvämt för att undvika hudirritation. Bältet går att förlänga med TENA Flex förlängningsbälte som ger extra komfort för de som behöver ett längre bälte runt midjan. Förlängningsbältet är både bekvämt och enkelt att använda och ger upp till 29 cm extra längd.


TENA Flex är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Produktens kroppsnära passform, benelastik och mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer med dubbla elastiktrådar hjälper till att förhindra läckage.

TENA Flex är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Skyddet har en luftig anatomisk design och textilliknande andningsbara material för hög komfort och god hudhälsa. Fixeras med kardborre direkt på bältet. Skyddet kan enkelt justeras och återförslutas flera gånger. Produkten har andningsbart spärrskikt.


TENA Flex är ett mycket diskret skydd. Den mycket goda passformen minskar risken för att skyddet är synligt utanpå kläderna. Samtliga TENA Flex har Odour Neutralizer, dvs är försedda med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

Användarinstruktion


Stående framifrån

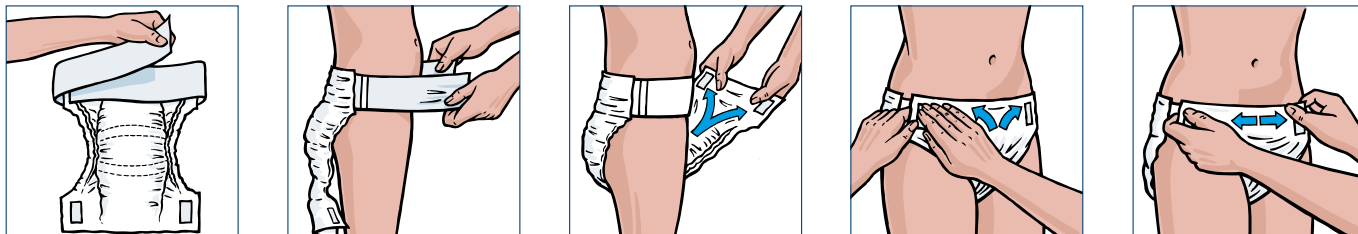

Stående bakifrån

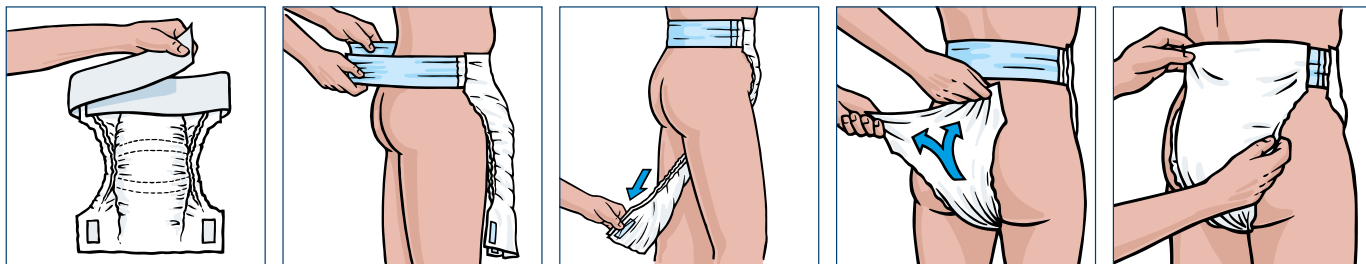

Liggande

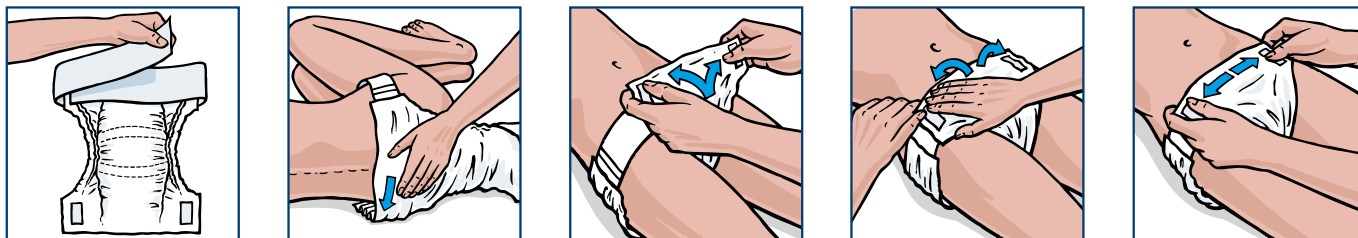

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshantering.

¹ TENA Flex i storlek XL har en extra kardborre istället för midjeelastik framtill, för extra säker passform

PRODUKTFAKTABLAD TENA FLEX



TENA Flex											
Uppsugningsnivå/storlek	Svanen-märkt	Midja/höft cm	Längd cm	Vikt g	Lår cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	Praktisk abs	ISO 11948-1 Absorptionskapacitet	Essity Art.nr
Normal											
Medium	✓	70-105	80	65	< 84	34	102	16	403	1208	73 00 82
Large	✓	85-120	86	73	< 99	34	102	16	442	1325	72 23 94
Plus											
Small	✓	60-90	71	70	< 72	30	90	16	519	1557	73 04 38
Medium	✓	70-105	80	81	< 84	30	90	16	595	1785	73 04 31
Large	✓	85-120	86	95	< 99	30	90	16	699	2096	72 85 99
X-large	✓	105-155	103	120	< 116	30	90	12	754	2261	72 49 60
Super											
Small	✓	60-90	71	83	< 72	30	90	16	647	1942	73 04 40
Medium	✓	70-105	80	93	< 84	30	90	16	750	2250	73 04 56
Large	✓	85-120	86	103	< 99	30	90	16	797	2392	72 86 95
X-large	✓	105-155	103	140	< 116	30	90	12	979	2936	72 49 70
Maxi											
Small	✓	60-90	71	112	< 72	22	66	16	924	2771	73 04 47
Medium	✓	70-105	80	120	< 84	22	66	16	1008	3025	73 04 33
Large	✓	85-120	86	143	< 99	22	66	16	1191	3573	72 96 20
X-large	✓	105-155	103	193	< 116	21	63	12	1521	4564	72 85 33
Ultima											
Small	✓	60-90	71	127	< 72	20	60	16	1067	3202	73 04 55
Medium	✓	70-105	80	144	< 84	20	60	16	1195	3586	73 04 36
Large	✓	85-120	86	170	< 99	20	60	16	1422	4265	72 99 09
X-large	✓	105-155	103	219	< 116	17	51	12	1704	5112	72 85 34
TENA Flex Förlängningsbälte			29	2,5	-	10	120	168			72 05 24

PRODUKTFAKTABLAD TENA FLEX

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene, High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, Övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, Undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

HÖFTBÄLTE

Material: Non-woven

Funktion: Fixeringsyta för kardborrband från skyddet, mjukt för huden, luftgenomsläppligt

ELASTIK I HÖFTBÄLTE

Material: SBS och Non-woven

Funktion: Följa kroppens rörelser och hålla skyddet på plats, bekvämlighet

MIDJEELASTIK

Material: Polyeten och SBS

Funktion: Hålla skyddet på plats, bekvämlighet

BEN ELASTIK

Material: Syntetiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

BARRIÄRELASTIK

Material: Elastan

Funktion: Förhindra sidoläckage av urin och faeces

För samtliga TENA Flex skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicintekniska produkter och är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA,
an Essity brand

