



MEDLANCE[®] *plus*

Variety of versions & compact body

MEDLANCE[®] PLUS SÄKERHETSLANSETT

Steril, engångs medicinteknisk
produkt avsedd för provtagning
av kapillärblod

Produktens avsedda användning

Medlance® Plus säkerhetslansetter är sterila medicintekniska produkter för engångsbruk. Avsedda för kapillär blodprovstagning. Avsedda endast för professionellt bruk.

Produktens egenskaper

Olika versioner

Olika versioner och tydlig färgkodning för att möta alla behov hos patienter och sjukvårdspersonal

Tydlig färgkodning för att särskilja storlekar


Kompakt stomme

Kontaktaktiverade, ingen förladdning krävs

Tvåstegs användning innebär minimal instruktion och tidsåtgång för sjukvårdspersonalen att utföra provtagningen

Nålens indragningsmekanism är designad för att förhindra stickskador före och efter provtagning

Produktstorlek gör den enkel att hantera

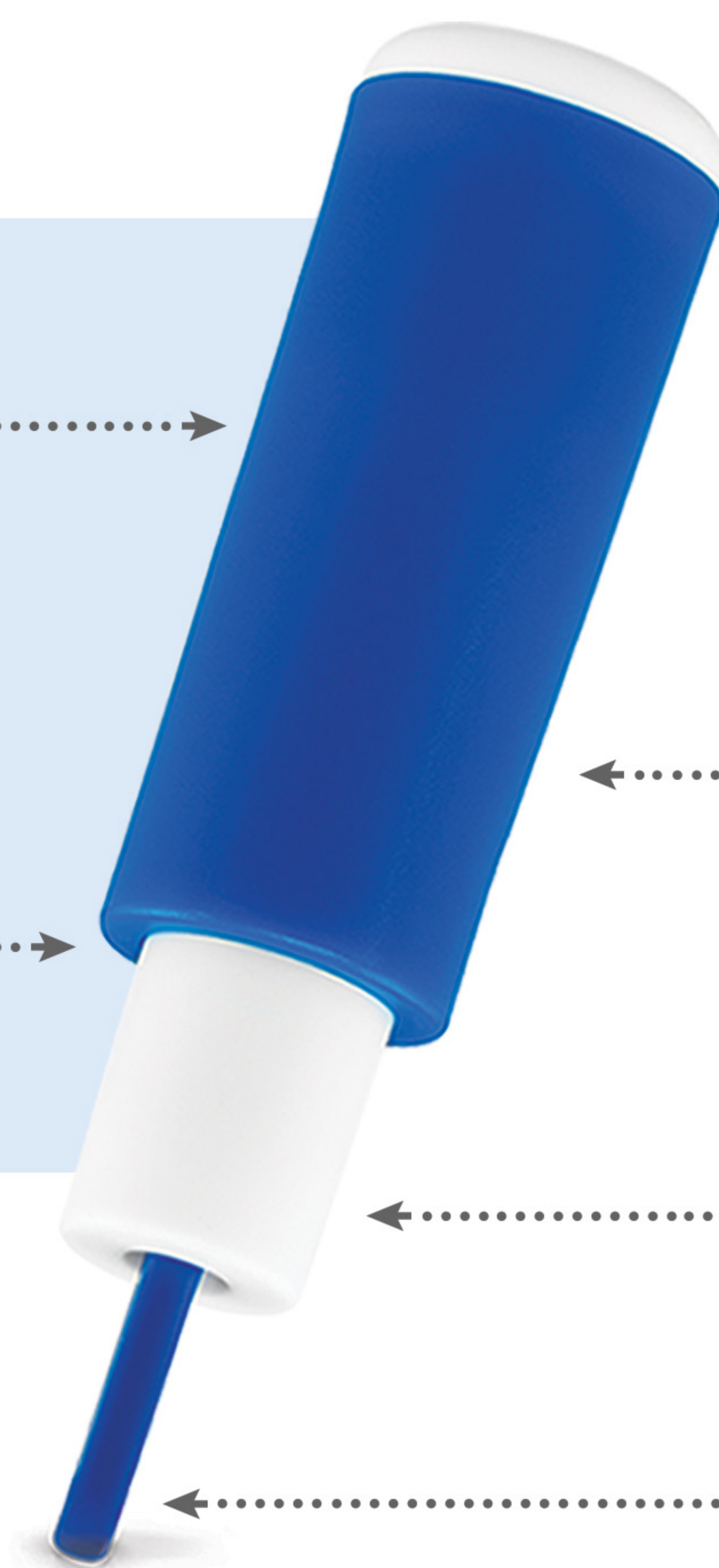

Sticksckador utsätter sjukvårdspersonal för blodburna patogener. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uppskattar att cirka 385 000 sticksckador uppträder årligen bland vårdpersonal på sjukhus.

Det har uppskattats att ungefär hälften eller fler av skadorna inte rapporteras. De flesta rapporterade sticksckador är sjuksköterskor, men laboratoriepersonal, läkare, medicinstudenter och annan vårdpersonal utsätts också för skador.

Sticksckador kan uppstå före, under eller till och med efter användning av vassa föremål och fortsätter att utgöra en allvarlig hälso- och säkerhetsrisk.

Sticksckador - fakta

“Över 80% av sticksckadorna kan förhindras med användning av säkrare nålanordningar, som, i kombination med personalens utbildning och kontroll av arbetsmetoder, kan minska skador med över 90%! *”


HTL-STREFA har åtagit sig att tillverka säkerhetsprodukter som är utformade för att minska eller eliminera risken för exponering av blodburna patogener.

Säkerhetslansetter, inklusive **Medlance® Plus**, är en integrerad del av program för förebyggande av sticksckador på sjukhus, kliniker, laboratorier, läkarmottagningar där både patienter och yrkesverksamma behöver känna sig trygga.


Genom att använda säkerhetslansetter minimeras sticksckador och infektioner.

**The WHO estimates based on CDC Report*


Hur man använder Medlance® Plus:

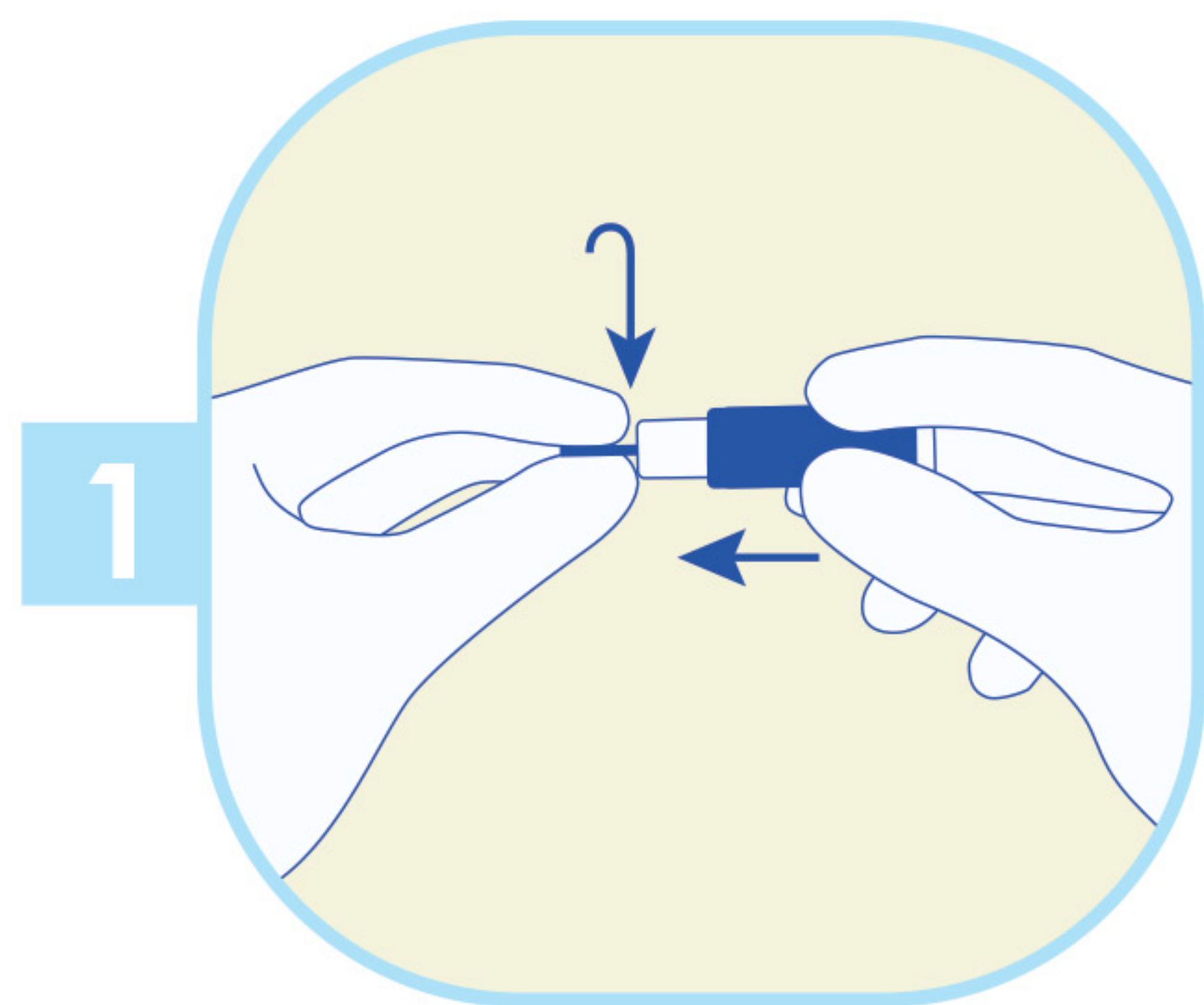

Vrid av skyddshylsan och dra rakt utåt.

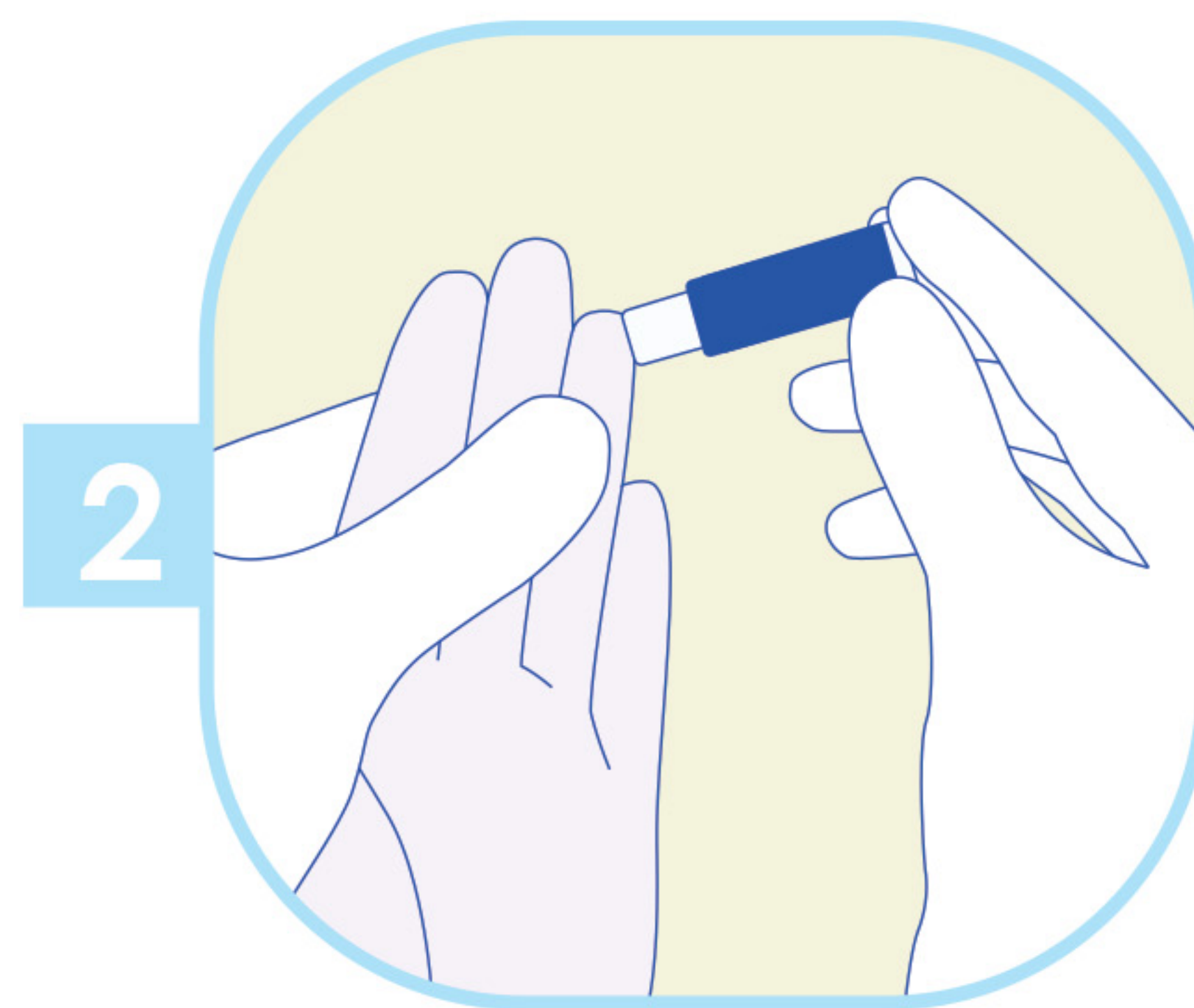

Tryck **Medlance® Plus** stadigt mot punktionsytan för att aktivera enheten.

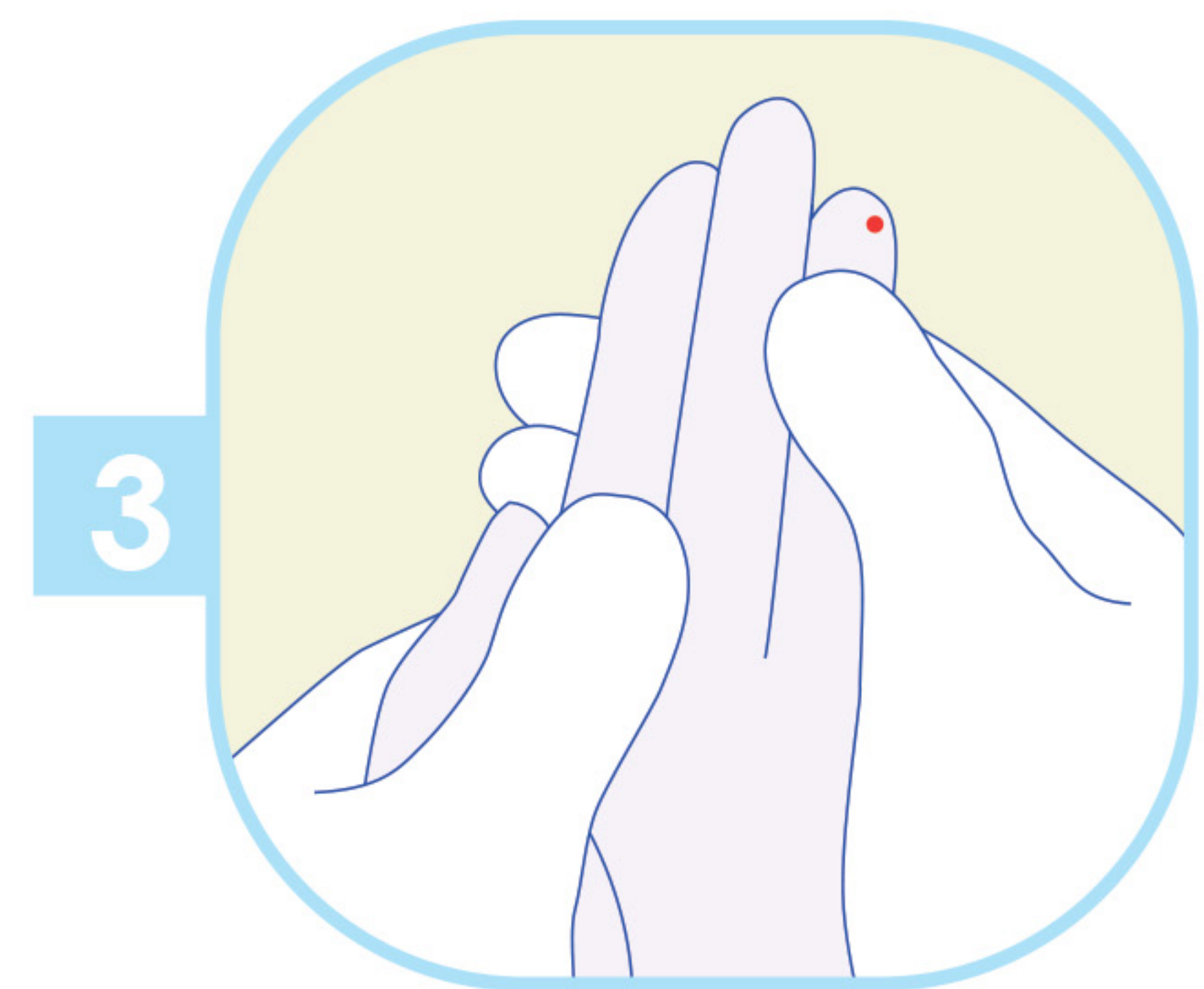






Applicera försiktigt intermitterande tryck nära punkteringsstället för att få önskad blodvolym. Kassera den använda lansetten i en behållare för vassa föremål enligt lokala föreskrifter.

Variety of versions & compact body

Medlance[®] Plus är en steril, kontaktaktiverad säkerhetslansett för engångsbruk som är avsedd för kapillär blodprovtagning

Tillgänglig i fem versioner:

	Kanyl gauge/blad	Stickdjup	Artikelnummer	Förpackning
 Super Lite	30G nål	1.2 mm	7241	200 st
 Lite	25G nål	1.5 mm	7042	200 st
 Universal	21G nål	1.8 mm	7044	200 st
 Extra	21G nål	2.4 mm	7045	200 st
 Special	0.8 mm blad	2.0 mm	7046	200 st

Referens:

Directions for safety lancets development based on nurses' needs; Poland, June 2016, HTL-STREFA S.A. data on file <https://www.osha.gov/needlesticks/needlefaq.html>

Mary Foley, MS, RN, Annemarie T. Leyden, EdD, RN; American Nurses Association – Independent Study Module Needlestick Safety and Prevention; http://www.who.int/occupational_health/activities/1anaism.pdf

Poland



HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków
info@htl-strefa.pl
www.htl-strefa.com



Find us on Facebook
www.facebook.com/HTLSTREFA

USA

HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy
Suite 300
Marietta, GA 30066

+1 770 528 0410
info@htl-strefa.com
www.htl-strefa.com



553-556/All/11/2017/
SE_Onemed

CE mark refers to the product
not to the brochure

CE 0344