

Produktfaktablad TENA Slip Bariatric

Användningsområde

TENA Slip Bariatric är ett komfortabelt allt-i-ett skydd i extra stora storlekar, XXL samt 3XL och är speciellt framtaget för vårdtagare med klinisk övervikt. Skydden finns i en absorptionsnivå (Super).

Helt andningsbar

dermatologiskt testade material med ConfioAir™

ConfioAir™

Odour Neutralizer


för en frisk och värdgig känsla

Spridningsskiktet

FeelDry™ kapslar snabbt urin och håller huden torr

våtindikator

Elastiska sidopaneler och återförslutningsbar fastsättning med kardborre

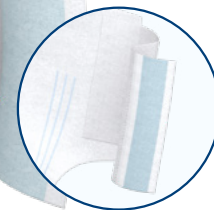

Stabil och mjuk benelsasik

för hög säkerhet och bekväm passform



TENA Slip Bariatric

Tillsammans gör vi skillnad

Produktfaktblad TENA Slip Bariatric

Produktegenskaper

TENA Slip Bariatric är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt.

TENA Slip Bariatric är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Textilliknande material runt hela produkten och elastiska sidopaneler helt i non-woven ger en optimal passform under hela användningstiden.

Skyddet har Odour Neutralizer, d v s är försett med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

Kardborreförslutning underlättar fixering och gör att skyddet enkelt kan justeras och återförslutas. Våtindikator finns för hjälp vid val av rätt produkt.

TENA Slip Bariatric

| Uppsugningsnivå/ storlek | Midja/höft cm | Längd cm | Vikt g | Antal/påse st | Antal/kart st | Antal.kart pall | Latex fri | ISO 11948-1 Absorptions kapacitet | Essity Art.nr |
|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|--------------|---|------------------|
| Bariatric XXL | 163-178 | 113 | 139 | 32 | 64 | 9 | Ja | 3087 | 61490 |
| Bariatric 3XL | 175-244 | 113 | 171 | 8 | 32 | 12 | Ja | 3199 | 61391 |

Användarinstruktion



Produktfaktblad TENA Slip Bariatric

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORPTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning.

BENELASTIK

Material: Polyeter och polyuretan

Funktion: Passform och läckagesäkerhet

För TENA Slip Bariatric gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.



TENA Slip Bariatric

Tillsammans gör vi skillnad