


Behandlingsfrihet

Infusionsset  
med stål- eller  
mjuk kanyl

# neria™ infusionsset

För en enkel och säker hantering vid subkutan infusionsbehandling

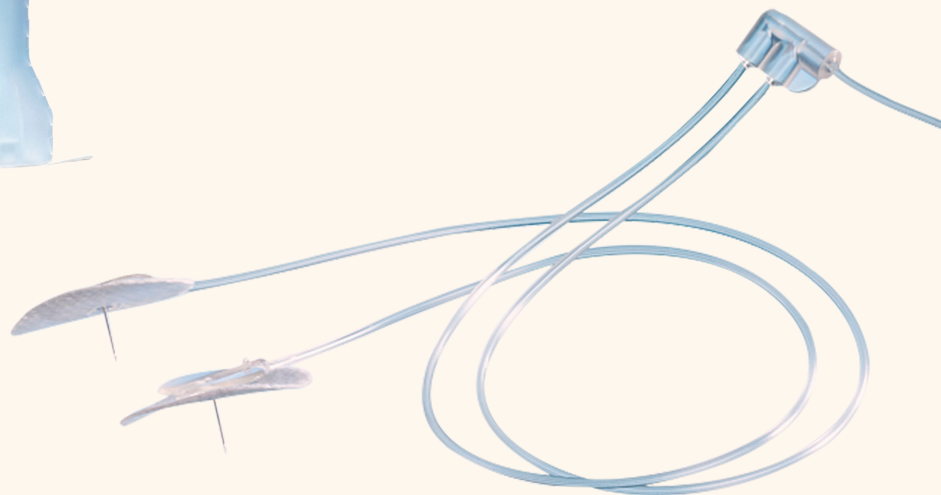

#### **GOD HÄFTFÖRMÅGA**

Integrerad hudvänlig häfta<sup>1</sup>  
med inspektionsfönster över insticksstället.

#### **DUBBELSLIPADE KANYLER**

Ger skonsamt<sup>2</sup> instick.

#### **DUBBLA SLANGLAGER**

Förhindrar knickar på slangen samt  
säkerställer kontinuerligt infusionsflöde.

#### **LÅG PRIMINGVOLYM**

Minimalt läkemedelssvinn<sup>3</sup>.

#### **STANDARD LUERKOPPLING**

Passar alla standardsprutor.

# neria™ infusionsset med stålkanyl

neria™ infusionsset är latexfria och innehåller inte ftalater eller PVC. Tillverkade av polyetylen.

## neria™ singel med 90° stålkanyl, 27 G

- Greppvänliga vingar för enkelt handhavande.
- Finns i fyra olika nåldjup.
- Stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, deferoxamin, morfin och apomorfin.
- Helt infusionsset, ej delbart.

Namn	Antal/frp	Varunummer
<b>neria™ singel</b> Infusionsset 6 mm stålkanyl, 60 cm slangset, 29 G stålkanyl	10 st	202990
<b>neria™ singel</b> Infusionsset 8 mm stålkanyl, 80 cm slangset	10 st	202992
<b>neria™ singel</b> Infusionsset 10 mm stålkanyl, 80 cm slangset	10 st	202995
<b>neria™ singel</b> Infusionsset 12 mm stålkanyl, 80 cm slangset	10 st	734840




neria™ singel

**Indikation & appliceringstid:**  
Apomorfin: 12 timmar  
Deferoxamin: 18 timmar  
Immunglobulin: 12 timmar  
Morfin: 48 timmar

## neria™ multi 90° stålkanyl, 27 G

- Greppvänliga vingar för enkelt handhavande.
- Finns i tre olika nåldjup.
- neria™ multi är stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner.
- Fördelar immunglobulin på två till fyra subkutana instick.

Namn	Antal/frp	Varunummer
<b>neria™ multi 2-grenat</b> Infusionsset 2 st 8 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	734640
<b>neria™ multi 2-grenat</b> Infusionsset 2 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	732760
<b>neria™ multi 3-grenat</b> Infusionsset 3 st 8 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	734641
<b>neria™ multi 3-grenat</b> Infusionsset 3 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	732761
<b>neria™ multi 3-grenat</b> Infusionsset 3 st 12 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	734642
<b>neria™ multi 4-grenat</b> Infusionsset 4 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	732762
<b>neria™ multi 4-grenat</b> Infusionsset 4 st 12 mm stålkanyl, 90 cm slangset	10 st	734643

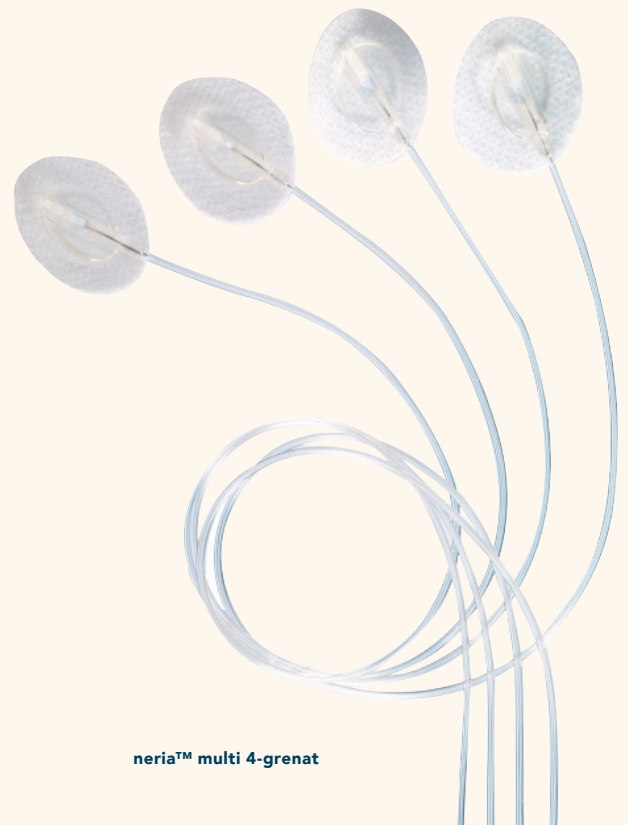

neria™ multi 4-grenat

**Indikation & appliceringstid:**  
Immunoglobulin: 12 timmar

# neria™ infusionsset med mjuk kanyl

Här beställer du:  
[order@infucare.se](mailto:order@infucare.se)

## neria™ guard 90° insticksvinkel med mjuk kanyl och helautomatisk inserter

- Med ett enkelt knapptryck appliceras neria™ guard in i den subkutana vävnaden. Finns i två olika nåldjup.
- neria™ guard är bra vid stickrädsla. Nålen är ej synlig före, under och efter instick.
- Delbart. Praktiskt vid bad eller dusch.
- Överensstämmer med EU-förordningen för stickskydd<sup>4</sup>.
- Stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

Namn	Antal/frp	Varunummer
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 12 cm slangset	10 st	738676
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 12 cm slangset	10 st	738740
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 30 cm slangset	10 st	912268
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 30 cm slangset	10 st	912269
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 60 cm slangset	10 st	738140
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 60 cm slangset	10 st	738141
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 80 cm slangset	10 st	738142
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 80 cm slangset	10 st	738143
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 110 cm slangset	10 st	912270
neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 110 cm slangset	10 st	912271



neria™ guard

### Indikation & appliceringstid:

Apomorfin	12 timmar
Immunglobulin	12 timmar
Morfin	72 timmar

## neria™ soft med 20-45° insticksvinkel delbart infusionsset med mjuk kanyl

- neria™ soft appliceras med greppvänligt tag med insticksnålens mandräng. Passar bra även för personer som har lite underhudsfett.
- Finns i två olika nåldjup.
- Kan användas vid palliativ vård för behandling av smärta<sup>5</sup>.
- Stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

Namn	Antal/frp	Varunummer
neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 30 cm slangset	10 st	204512
neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 60 cm slangset	10 st	202975
neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 80 cm slangset	10 st	202976
neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 110 cm slangset	10 st	202977
neria™ soft Infusionsset 17 mm mjuk kanyl, 60 cm slangset	10 st	203450



neria™ soft

### Indikation & appliceringstid:

Apomorfin	12 timmar
Immunglobulin	12 timmar
Morfin	72 timmar

Kan förskrivas  
och hämtas på  
apotek

**NERIA™ INFUSIONSSET** är utvecklade för subkutan tillförsel av läkemedel. De kan användas vid både infusions- och injektionsbehandling. Neria infusionsset är användarvänliga och finns i flera utförande, med mjuk kanyl, stålkanyl och 1-4 grenar samt integrerad hudvänlig häfta<sup>1</sup>.

Neria infusionsset har slangfäste med standard luerkoppling. Infusionsseten kopplas till spruta för bärbär infusionspump eller används vid intermittent injektion.

Infusionsseten levereras i förpackning om 10 st.

## Teknisk specifikation neria™ infusionsset

INFUSIONSSET	KANYL	INSTICKSVINKEL	KANYLDJUP	INFÖRINGS- NÅLENS STORLEK	SLANGLÄNGD	PRIMINGVOLYM	BORTKOPPLING
<b>NERIA™ SINGEL</b>	Stål, dubbelslipad.	90°	6, 8, 10 och 12 mm	29 G (6 mm), 27 G	6 mm: 60 cm 8 - 12 mm: 80 cm	60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml	Nej
<b>NERIA™ MULTI</b>	Stål, dubbelslipad.	90°	8, 10 och 12 mm	27 G	90 cm (60+30)	2 - 0,36 ml 3 - 0,43 ml 4 - 0,51 ml	Nej
<b>NERIA™ GUARD</b>	Mjuk (motsvarande 23G innerdiameter)	90°	6 mm och 9 mm	27 G	12, 30, 60, 80 och 110 cm	12 cm - 0,04 ml 30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml	Ja, på insticks- stället
<b>NERIA™ SOFT</b>	Mjuk (motsvarande 23G innerdiameter)	20-45°	13 mm och 17 mm	27 G	30, 60, 80 och 110 cm	30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml	Ja, på insticks- stället

**nordic**  
**INFUCARE**

Distributör • [www.infucare.com](http://www.infucare.com)

SVERIGE: Box 140 26 • 167 14 BROMMA • + 46 8 601 24 40 • [info@infucare.se](mailto:info@infucare.se)  
DANMARK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • [info@infucare.dk](mailto:info@infucare.dk)  
FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 20 734 87 64 • [info@infucare.fi](mailto:info@infucare.fi)  
NORGE: Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • [info@infucare.no](mailto:info@infucare.no)

**Referenser:** 1. Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s. 2. Parsons J. Infusion line preference of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing. December 2009. Vol 5 No 12 3. Chan.G.C.F., Ng D.D.M.W.et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion - Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-over Assessment Model. Am.J. Hematol, 76;398-4044. 4. Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector. 5. Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: the neria™ soft infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2012, vol 18, No 11 .