

FoamLite™

ConvaTec


Ivrig att göra sitt jobb varje dag

Tunt, mjukt och följsamt förband
som supporterar hanteringen av
akuta sår på ett effektivt sätt





Foam Lite™ förband från ConvaTec är speciellt utvecklat för att hantera svårläkta och akuta sår med liten mängd sårvätska

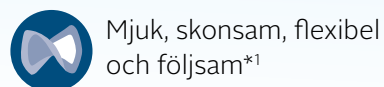

Mjuk, skonsam, flexibel och följsam*¹



Enkel att applicera och avlägsna*^{1,2}



Kan klippas till önskad storlek och form*



Vidhäftningen fastnar inte på handskar eller på sig självt*



Barriär mot bakterier och virus*¹



Vattenavvisande och duschbar*¹



Mjuk och tunn



Kan sitta kvar i upp till 7 dagar*

Tre lager som arbetar i synergi

1 Skyddande filmlager


- Mjukt ytterlager som utgör en barriär mot vatten, bakterier och virus* samt avdunstande förmåga av vätska

2 Lager av polyuretanskum (PU)

- Tunt, flexibelt och mjukt skumlager som är utvecklat för att hantera liten mängd sårvätska och för att bibehålla en fuktig sårhelingsmiljö*¹

3 Vidhäftande lager av silikon

- Perforerad, skonsam och hudvänlig vidhäftning av silikon som är enkel att applicera, placera om¹ och ta bort utan att skada sårbedden eller huden runt såret.^{1,2}

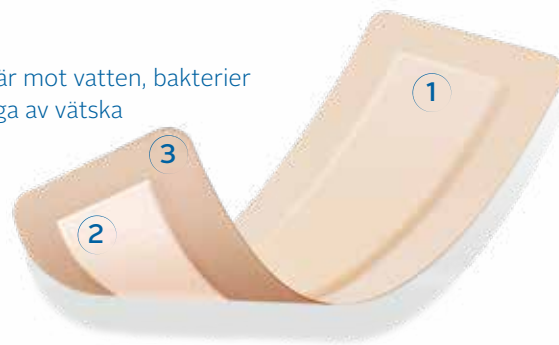

Tillgänglig i 6 storlekar



5 cm x 5 cm



8 cm x 8 cm




10 cm x 10 cm



15 cm x 15 cm



5,5 cm x 12 cm

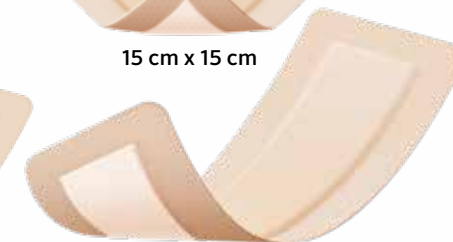

10 cm x 20 cm

Ivrig att göra sitt jobb varje dag



Skin's Guardians
FÖRSVARA. SKYDDA. VÅRDA

* Fullständig bruksanvisning finns i bipacksedeln för FoamLite™ förband.

[†] Visat *in vitro*



Tunt förband med många användningsområden...

1) Akuta sår

2) Svårläkta sår

Exempel:

- ✓ Fotsår hos diabetiker
- ✓ Lacerationssår
- ✓ Venösa bensår



Bilder används med tillstånd från Dr M. Wisser, Gériatre, CH Melun

3) och inom kirurgi



In intraoperative and postoperative

Ivrig att göra sitt jobb varje dag


Plastikkirurgi



Hjälper till att bibehålla en optimal fuktig sår-läkningsmiljö¹

Exempel:

- ✓ Bröstkirurgi
- ✓ Fettsugning
- ✓ Hudavskrapning
- ✓ Tagställen

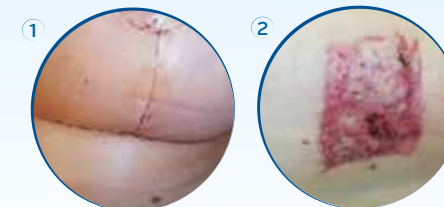

Bilder används med tillstånd från:

1. Dr J. Tiguemounine, Chirurgien Plasticien, Reims
2. Dr M. Wisser, Gériatre, CH Melun


Dermatologisk kirurgi



Designad för autramatiskt avlägsnande för att öka patientkomforten²

Exempel:

- ✓ Hudbiopsi och avlägsnande av födelsemärke
- ✓ Avlägsnande av hudtumörer

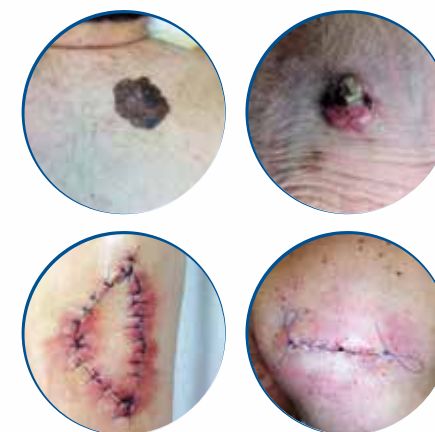

Bilder används med tillstånd från:

Dr V. Orlandini, Dermatologue, CHU Bordeaux



Ortopedi och
Traumakirurgi

Tillgänglig i sex storlekar för att
passa olika platser på kroppen

Exempel:

- ✓ Hallux valgus
- ✓ Lacerationer
- ✓ Suturetrade sårskador



Bilder används med tillstånd från:
1. F. Julien, IDE, Nice
2. Dr J. Chateau, Chirurgien Plasticien, HCL Lyon

Handkirurgi

Designad för att vara flexibel och följsam
så förbandet följer med kroppsrörelser¹

Exempel:

- ✓ Skador på hand och fingrar
- ✓ Dupuytren's kontraktur
- ✓ Karpaltunnelsyndrom



Bilder används med tillstånd från:
Dr J. Chateau, Chirurgien Plasticien, HCL Lyon

Kärlkirurgi

Vattenavvisande film som också utgör
en barriär mot bakterier och virus för att
skydda mot kontamination¹

Exempel:

- ✓ By-pass kirurgi
- ✓ Varicerkirurgi
- ✓ Endovaskulära ingrepp
- ✓ Arteriovenösa fistlar




ConvaTec France

Endokrinologisk
kirurgi

Mjuk och skonsam vidhäftning av silikon
som kan användas på skör hud^{1,2}

Exempel:

- ✓ Tyreoidektomi
- ✓ Excision av tumör på halsen

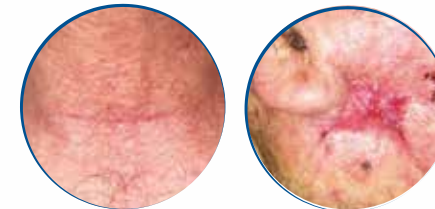

Bilder används med tillstånd från:
Dr D. Djelailia, Chirurgien ORL, CHP de l'Europe Le Port-Marly

Ivrig att göra sitt jobb varje dag

Du kan lita på att skumförband från ConvaTec gör sitt jobb



Foam Lite™ från ConvaTec – hanterar svårsläkta och akuta sår med liten mängd såravtska.

Storlek	Antal/fp	Varunummer
Vidhäftande		
5 x 5 cm	10	421927
5.5 x 12 cm	10	421563
8 x 8 cm	10	421557
10 x 10 cm	10	421559
15 x 15 cm	10	421561
10 x 20 cm	10	421928



Ivrig att göra sitt jobb varje dag

Om du vill veta mer om ConvaTec FoamLite™ förband eller boka in ett besök med representant från ConvaTec, ring 020-21 22 22



AQUACEL® Foam förband hanterar lite till måttligt vätskande sår

Storlek	Antal/fp	Varunummer
Ikke vidhäftande		
8 x 8 cm	10	420804
10 x 10 cm	10	420680
12.5 x 12,5 cm	10	420619
17.5 x 17,5 cm	10	420621
21 x 21 cm	5	420623
19.8 x 14 cm (Häl)	5	420625
20 x 16,9 cm (Sacrum)	5	420626
24 x 21,5 cm (Sacrum)	5	420828
8 x 13 cm	10	421149
10 x 20 cm	5	421150
10 x 30 cm	5	421154
25 x 30 cm	5	420624
Vidhäftande		
5 x 5 cm	10	420631
10 x 10 cm	10	420633
15 x 15 cm	5	420635
20 x 20 cm	5	420636
15 x 20 cm	5	420637
10 x 20 cm	5	421156

1. *In vitro* Performance of Foam Lite™ ConvaTec WHRI4680 MS132. 25th April 2016. 2. Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com

@/™ anger varumärken som tillhör ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd är behörig användare. © 2017 ConvaTec Inc. 2016. AP-017923-MM

ConvaTec Sweden AB, Box 15138, 167 15 Bromma
Kundservice: 020-21 22 22 • convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se

