

Larynxmasker med tillbehör

 MEDIQ



Cufftrycksindikator

Cufftrycksindikatorn är en integrerad engångsmätare som har en ständig monitorering av trycket i kuffen utan att behöva koppla en cufftrycksmätare. Cufftrycksindikatorn skapades för att undvika riskfaktorer så som för högt tryck i kuffen som kan leda till vävnadsskada eller läckage runt kuffen, vilket kan leda till aspiration.


Den integrerade cufftrycksindikatorn innehåller fyra zoner.

Den "gröna zonen" indikerar optimalt cufftryck

Den "gula zonen" indikerar möjligt lågt cufftryck

Den "transparenta zonen" mellan röd och grön indikerar på förhöjt cufftryck

Den "röda zonen" indikerar på för högt tryck i cuffen

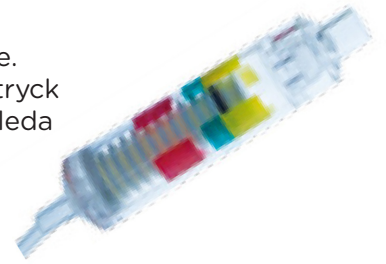

Färgkoder

På förpackningarna för vissa Larynxmasker finns en färgmarkering, för att underlätta en snabb identifiering av storlek.

Storlek	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Färg		orange	blå	ljusblå	grön	gul	röd	rosa

Larynxmasker - engångs

Protector - PVC-fri

Protector är en andra generationens larynxmask utrustad med två sugkanaler, en för möjligheten att använda en sond max storlek 18 Fr, för att kunna tömma magsäcken på maginnehåll, den andra för att kunna tömma den integrerade reservoaren. Protector har en integrerad cufftrycksindikator, vilket gör det möjligt att se trycket i kuffen utan att använda en kufftrycksmätare. Det finns även möjlighet att kunna intubera genom larynxmasken med hjälp av ett fiberskop. Masken har ett effektivt First- och Second Seal, fixeringsplatta för möjlighet att kunna fästa larynxmasken samt integrerat bitblock i skaftet. Tillverkad av silikon och polypropylen. Största tub som kan användas är 7,5 mm.

MR-kompatibel.
Steril, för engångsbruk. PVC-fri.
Avd.förp. 10 st.



Art.nr. med cufftrycks-indikator	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym	Största ETT tub	Max storlek sond
192030	3,0	30 - 50	30 ml	6,5 mm	16 Fr
192040	4,0	50 - 70	45 ml	7,0 mm	16 Fr
192050	5,0	70 - 100	45 ml	7,0 mm	16 Fr

First and second seal

First seal:

För att säkerställa luftvägarna vid förhöjt tryck i thorax, så som vid övervikt eller ökat lungtryck. tätar till i esophagus.

Second seal :

Genom sin unika tätning minskar risken att luft kommer ner i magsäcken, samt att maginnehåll kommer upp och kommer över i luftvägarna

Supreme™

Supreme Larynxmask med möjlighet att kunna sonda patienten för att ev tömma ut maginnehåll. Mjuk och långsträckt cuff som är utformad för att ge effektiv tätning. Fixeringsplatta och integrerat bitblock. Det finns även möjlighet att kunna intubera genom larynxmasken med hjälp av ett fiberskop.

MR-kompatibel.
Tillverkad av PVC, steril, för engångsbruk.
Avd.förp. 10 st.



Artikel-nummer	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym	Max storlek sond
175010	1,0	< 5	5 ml	6 Fr
175015	1,5	5 - 10	8 ml	6 Fr
175020	2,0	10 - 20	12 ml	10 Fr
175025	2,5	20 - 30	20 ml	10 Fr
175030	3,0	30 - 50	30 ml	14 Fr
175040	4,0	50 - 70	45 ml	14 Fr
175050	5,0	70 - 100	45 ml	14 Fr

Larynxmasker - engångs

Fastrach™

Fastrach™ larynxmask är designad för svåra luftvägs-situationer. Fastrach™ skapar snabbt en fri luftväg och möjliggör att kunna intubera patienten. Det styva handtaget underlättar insättandet av en trachealtub, borttagande av larynxmasken efter ev intubering. Tillverkad av PVC. Steril, för engångsbruk. Avd. förp. 10 st.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym	Största ETT tub ID mm		
135130	3,0	30 - 50	20 ml	6,0	6,5	7,0
135140	4,0	50 - 70	30 ml	6,0	6,5	7,0
135150	5,0	70 - 100	40 ml	6,0	6,5	7,0

Flexible - armerad, silikon

Larynxmask Sure Seal med integrerad cufftrycks-indikator. Den har en metall spiral i skaftet vilket gör att den inte kan knickas. Tillverkad av silikon, kg-markering, färgmarkering på förpackningen för enkel och snabb storleksidentifikation. Steril, för engångsbruk. PVC-fri.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Färgkod	Avd. förp.
105220-1	1,0	< 5	vit	10
105220-15	1,5	5 - 10	orange	10
105220-2	2,0	10 - 20	lila	10
105220-25	2,5	20 - 30	blå	10
105220-3	3,0	30 - 50	grön	10
105220-4	4,0	50 - 70	gul	10
105220-5	5,0	70 - 100	röd	10
105220-6	6,0	> 100	rosa	5

Larynxmasker - engångs

Unique

Unique larynxmask med integrerad cufftrycksindikator, kg-markering, färgmarkering på förpackningen för snabb och enkel storleksidentifikation. MRI-kompatibel. Masken är tillverkad av PVC och Silikon. Steril, för engångsbruk.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Färgkod	Avd.förp.
105200-1	1,0	< 5	vit	10
105200-15	1,5	5 - 10	orange	10
105200-2	2,0	10 - 20	lila	10
105200-25	2,5	20 - 30	blå	10
105200-3	3,0	30 - 50	grön	10
105200-4	4,0	50 - 70	gul	10
105200-5	5,0	70 - 100	röd	10
105200-6	6,0	> 100	rosa	5

Unique - silikon

Unique larynxmask med integrerad cufftrycksindikator, masken är tillverkad av silikon, kg-markering, färgmarkering på förpackningen för snabb och enkel storleksidentifikation. MRI-kompatibel. Steril, för engångsbruk. PVC-fri, gjord i silikon.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Färgkod	Avd.förp.
105210-1	1,0	< 5	vit	10
105210-15	1,5	5 - 10	orange	10
105210-2	2,0	10 - 20	lila	10
105210-25	2,5	20 - 30	blå	10
105210-3	3,0	30 - 50	grön	10
105210-4	4,0	50 - 70	gul	10
105210-5	5,0	70 - 100	röd	10
105210-6	6,0	> 100	rosa	5

Larynxmasker - engångs

Unique - förformad

Unique förformad larynxmask med integrerad cufftrycksindikator, kg-märkning, färgmärkning på förpackningen för snabb och enkel storleksidentifikation. MR-kompatibel. Tillverkad av PVC och silikon. Steril för engångsbruk.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Färgkod	Avd.förp.
142010	1,0	< 5	vit	10
142015	1,5	5 - 10	orange	10
142020	2,0	10 - 20	lila	10
142025	2,5	20 - 30	blå	10
142030	3,0	30 - 50	grön	10
142040	4,0	50 - 70	gul	10
142050	5,0	70 - 100	röd	10

Larynxmasker - flergångs

Proseal™ - silikon PVC-fri

Proseal™ är en andra generationens larynxmask tillverkad av silikon, med sugkanal, ett effektivt First Seal™ och Second Seal™
Osteril, för flergångsbruk.
Avd.förp. 1 st.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym	Max strl sond
150010	1,0	< 5	4 ml	8 Fr
150015	1,5	5 - 10	7 ml	10
150020	2,0	10 - 20	10 ml	10 Fr
150025	2,5	20 - 30	14 ml	14 Fr
150030	3,0	30 - 50	20 ml	16 Fr
150040	4,0	50 - 70	30 ml	16 Fr
150050	5,0	70 - 100	40 ml	18 Fr

Classic™ - silikon

Classic™ larynxmask med pilotballong, masken är tillverkad av silikon, kg-markering, utrustad med epiglottis galler för att förhindra att epiglottis täpper till lufttillförseln. Osteril, för flergångsbruk. PVC-fri.
Avd.förp. 1 st.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym
100010	1,0	< 5	4 ml
100015	1,5	5 - 10	7 ml
100020	2,0	10 - 20	10 ml
100025	2,5	20 - 30	14 ml
100030	3,0	30 - 50	20 ml
100040	4,0	50 - 70	30 ml
100050	5,0	70 - 100	40 ml
100060	6,0	> 100	50 ml

Larynxmasker - flergångs

Fastrach™ - silikon

Fastrach™ larynxmask är designad för svåra luftvägs-situationer. Fastrach™ skapar snabbt en fri luftväg och möjliggör att kunna intubera patienten. Det styva handtaget underlättar insättandet av en trachealtub, borttagande av larynxmasken efter ev intubering av larynxmasken. Tillverkad av silikon. Steril, för engångsbruk. Avd.förp. 1 st.



Artikelnummer	Storlek	Patientvikt kg	Max cuff volym
130030	3,0	30 - 50	20 ml
130040	4,0	50 - 70-	30 ml
130050	5,0	70 - 100	40 ml

Storlek	Största ETT tub ID mm				
3,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
4,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0

Larynxmasker - tillbehör

Fastrach™ - endotrachealtub

Fastrach™ ETT är en endotrachealtub utformad för att vara kompatibel med Fastrach™ tillverkad av PVC, för engångsbruk. Latexfri.



Artikelnummer	Tubstorlek	Avd.förp.
136060	6,0 mm	10
136065	6,5 mm	10
136070	7,0 mm	10
136075	7,5 mm	10
136080	8,0 mm	10

Fastrach™ - endotrachealtub

Fastrach™ ETT är en endotrachealtub utformad för att vara kompatibel med Fastrach™ tillverkad av silikon. För flergångsbruk. Latexfri. PVC-fri.



Artikelnummer	Tubstorlek	Avd.förp.
131060	6,0 mm	1
131065	6,5 mm	1
131070	7,0 mm	1
131075	7,5 mm	1
131080	8,0 mm	1

Fastrach™ - "Påputtare" silikon

Fastrach™ "påputtare" i silikon till Fastrach trachealtub. Steril, för flergångsbruk. Latexfri.



Artikelnummer	Avd.förp.
130099	1

Larynxmasker - tillbehör

Fastrach™ - Introducer i metall

Passar till larynxmask ProSeal™.
Osteril, för flergångsbruk. Latexfri.



Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
151010	ledare	1 - 2,5	1
151030	ledare	3 - 5	1

Cufftömmare


Passar till larynxmask ProSeal™.



Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
151000	cufftömmare	-	10

Cufftömmare

Passar till larynxmask Classic™, Fastrach™, Flexible™
och Unique™.

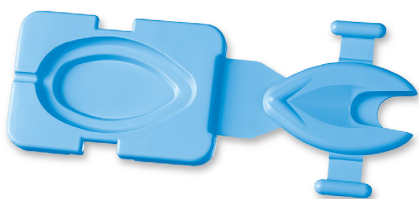

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avd. förp.
101020	passar till flergångsmask	2 - 2,5	1
101030	passar till flergångsmask	3 - 4	1
101050	passar till flergångsmask	5	1

Larynxmasker - tillbehör

TrachJell

Water soluble lubricating gel 8.5 g.
Sterile. 25 i varje förpackning.



Artikelnummer	Volym	Avd.förp.
556100	8,5 g	25

Rengöringsborste



Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
152000	rengöringsborste till larynxmask	-	10



MEDIQ SVERIGE AB
Box 10302
434 24 Kungsbacka

Hallabäcksvägen 1
434 37 Kungsbacka

Kundservice har öppet
vardagar 08.00-16.30

Tel: 031-388 93 00
E-mail: kundservice.hospital@mediq.com
www.mediq.se

COMMITTED TO YOUR CARE