

Formar sig perfekt. Varje gång.

Biatain® Silicone Lite med 3DFit Technology formar sig efter sårbädden, fyller håligheten mellan sårbädden och förbandet och minskar ansamlingen av sårvätska för optimala sårhelingsförhållanden.

- Formar sig efter sårbotten
- Absorberar vertikalt
- Låser in sårvätskan

Biatain® Silicone Lite



Biatain® Silicone Lite

3DFit Technology fyller hålrummet och reducerar ansamling av sårvätska



Formar sig efter sårbotten

Vid kontakt med sårvätska expanderar skummet och formar sig till sårbädden och minskar ansamling av sårvätska.




Absorberar vertikalt

Mikrokapillärerna i skumstrukturen absorberar sårvätska och blod vertikalt.

Låser in sårvätskan

Sårvätskan hålls in och hålls kvar under kompression, så att risken för läckage och maceration av sårkant och hud runt såret minskar.

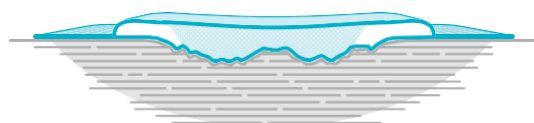

Produktuppbyggnad

Biatain® Silicone Lite är ett mjukt och flexibelt polyuretanskumförband, som består av en semipermeabel bakteriell och vattentät toppfilm, ett skumskikt med 3DFit Technology, ett mjukt silikonkontaktskikt på skumdynan och silikonlimkant samt en 3-delad beröringsfri appliceringsfilm.

Användning

Biatain® Silicone Lite används till ett brett spektrum av icke-vätskande till sparsamt vätskande svårärläkt och akuta sår. Det inkluderar bensår, trycksår, icke-infekterade diabetiska fotsår, tagställen, postoperativa sår, skrap- och skavsår. Biatain® Silicone Lite kan användas under kompression och kan bäras i upp till 7 dagar.

Biatain Silicone Lite



Art.nr	Stl. i cm	Dynstl. i cm	Antal i fp
334520	5x5	2,2x2,2	5
334443	7,5x7,5	4,5x4,5	10
334453	10x10	6,5x6,5	10
334463	12,5x12,5	8,5x8,5	10
334530	5x12,5	2,2x9,7	5