

Formar sig perfekt. Varje gång.

Biatain® Silicone med 3DFit teknologi formar sig efter sårbotten, fyller hålrummet mellan sårbotten och förband, och reducerar anhopningen av exsudat för optimala såråkningsbetingelser.

- Formar sig efter sårbotten
- Absorberar vertikalt
- Låser in exsudatet

Biatain® Silicone



3DFit teknologin fyller hålrummet och reducerar anhopning av exsudat



Formar sig efter sårbotten

Vid kontakt med sårexsudat expanderar skummet och formar sig till sårbädden och minskar därmed ansamlingen av exsudat.




Absorberar vertikalt

Mikrokapillärerna i skumstrukturen absorberar exsudatet vertikalt.

Låser in exsudatet

Exsudatet innesluts och hålls kvar även under kompression, så att risken för läckage och maceration av sårkanten och huden runt såret minskar.

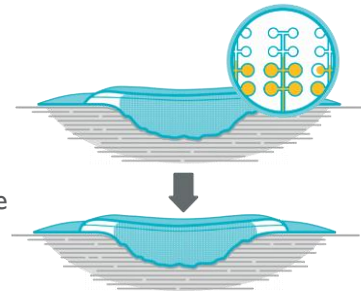

Produktuppbyggnad

Biatain Silicone är ett mjukt och formbart polyuretanskumsförband, som består av en semipermeabel bakteriell- och vattentät toppfilm, ett lock-away-lager, ett skumlager med 3DFit teknologi, ett mjukt silikonkontaktlager på skumkudden och silikonlimkant, samt en 3-delad beröringsfri appliceringsfilm.

Användning

Biatain Silicone används till ett brett spektrum av lätt till kraftigt vätskande svårläkta och akuta sår. Det inkluderar bensår, trycksår, icke-infekterade diabetiska fotsår, tagställen, postoperativa sår och skrapår. Biatain Silicone kan användas under kompression och kan bäras i upp till 7 dagar.

Biatain Silicone



Varunr.	Str. i cm	Dyna. i cm	Antal i avdfp
334343	7,5x7,5	4,5x4,5	10
334353	10x10	6,5x6,5	10
334363	12,5x12,5	8,5x8,5	10
334373	15x15	10x10	5
334383	17,5x17,5	13x13	5
334000	10x20	5,5x15,5	5
334010	10x30	5,5x25,5	5

Biatain Silicone Multisite



Varunr.	Str. i cm	Dyna. i cm	Antal i avdfp
334080	14x19,5	7,5x12,1	5

Biatain Silicone Sakrum



Varunr.	Str. i cm	Dyna. i cm	Antal i avdfp
334040	15x19	10,9x14	5
334050	25x25	17x17,2	5

Biatain Silicone Häl



Varunr.	Str. i cm	Dyna. i cm	Antal i avdfp
334060	18x18	14x13,2	5