

## evercare<sup>®</sup> inLine Gravitationsaggregat, luftat, FilterStop, 3-vägskran limmad, PVC-fri

REF: 10708, 10712

evercare<sup>®</sup> inLine Gravitationsset är steril produkt för engångsbruk som används för att leda intravenösa vätskor in i patientens vaskulära system genom att ansluta till en infusionskälla i ena änden och till en vaskulär access i andra änden. Vätskan överförs med hjälp av gravitationen och flödes hastigheten regleras av en blå rullklämma. Lämpliga för glasflaskor, injektionsflaskor samt påsar eller flaskor av plast.

### Egenskaper

- ▶ 3-vägskran
- ▶ Lipidresistent
- ▶ 45°-klickfunktion
- ▶ Klarar tryck upp till 2 bar
- ▶ Limmad
- ▶ Roterande luer lock




REF	Beskrivning	Storlek-slang, inre/ytte, L (längd)	Priming volume(ml) Ca	Antal dispenser/transport kartong
10708	Gravitationsaggregat, luftat, FilterStop, 3-vägskran limmad, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 195cm	0,065	20 / 80
10712		Ø 3/4,1 mm,	0,065	20 / 80

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.

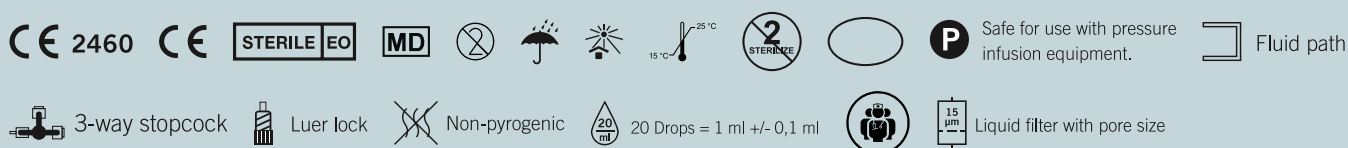

### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 8536-8, EN ISO 80369-7

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
-----------	---------------------------

## Varningar och rekommendationer

### Varningar

Användningen av denna produkt är begränsad till utbildade läkare och sjuksköterska. Läs instruktionerna före användning. Enheten ska användas i enlighet med instruktionerna. Använd inte för transfusion av blod eller blodkomponenter. Produkten är garanterat steril och pyrogenfri om den individuella förpackningen ej är öppnad eller skadad. Får ej användas om förpackningen är skadad eller om skyddspropparna ligger löst eller fattas. Dra inte åt en luerkoppling utöver friktionspassningen då det kan skada både luerkopplingen och andra kopplingsenheter. Använd inga instrument för fastklämning av slangen eller åtdragning av luer-kontakten. Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

### Förvaringsrekommendationer

Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

### Avfallshantering

Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

### Hållbarhetstid

5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	235 x 100
Dispenserförpackning	PP	305 x 460
Transportförpackning	TCF kvalitet, Kartong	400 x 295 x 287
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
10708	06438129124453	N/A	06438129524451
10712	06438129125580	N/A	06438129525588

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.