

# Produktfaktblad HOMECATH PLUS ® PVC-fri



## HOMECATH PLUS hydrofil tappningskateter PVC-fri med vattenpåse

Klass:	Class IIa
Certifiering:	ISO 13485-2003, ISO 9001-2000, CE 93/42/EEC
Anmält organ:	UDEM International Certification Audit Training Cent. Ind. Co. Ltd.(European Notified Body Nr. 2292)
Certifiering nr:	85209 58524 M.2016.106.6895

### KARAKTERISTIKA

Hydrofil tappningskateter är en engångs urintappningskateter tillverkad av termoplastisk elastomer (TPS-SEBS) och täckt med tvärbunden PVP (Polyvinylpyrrolidon) för hydrofil ren intermittent kateterisering. Ytskiktet på HomeCath Plus ® katetrar har en hydrofil beläggning som binder vatten. Resultatet är en mycket blöt och hal yta som har en 90-95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. Den hydrofila ytan innebär att katetern har låg friktion när den införes.

Katetern har jämn beläggning, slät yta, sidohålen avfasade och toppen avrundad.

Kateterkonnektorerna har en internationell färgkod enligt följande:

CH	06	08	10	12	14	16	18
Färg	Ljusgrön	Blå	Svart	Vit	Mörkgrön	Orange	Röd

### SORTIMENT (Per kön och ålder)

#### Nelaton

Män: 40 cm, CH 06-08-10-12-14-16-18

Kvinnor: 15 cm CH 12-14 och 20 cm CH 12-14-16-18.

Barn: 15 cm CH 08-10 och 20 cm CH 06-08-10 & 30 cm CH 06-08-10-12.

#### Tiemann

Män: 40 cm CH 08-10-12-14-16-18

(CH: Charriere 1 mm = 3 CH)

### STERILISATION

Steriliseras med Etylenoxid


För engångsbruk

### INDIKATIONER

- Tömning av urinblåsan, på sjukvårdsinrättning eller i hemmet
- Ren intermittent kateterisering

Handhavandeinstruktioner finns på förpackningen.

HOME CATH PLUS

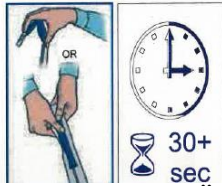

### ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

- Händerna bör tvättas innan kateterisering.
- Öppna vattenpåsen genom att vika och pressa.
- Förpackningen kan fästas på en torr yta med hjälp av tejpen.
- Katetern bör dränkas i vatten under minst 30 sekunder, för att bli hal och glatt inför kateteriseringen.
- Ta bort vattnet från förpackningen. Katetern är nu klar att användas.
- Öppna kateterförpackningen genom att dra i flikarna på konnektorsidan.
- Om katetern är alltför hal att hantera, kan förpackningen öppnas genom att dra i bottenflikarna och utföra kateterisering utan att överhuvudtaget vidröra katetern.
- För in HomeCath Plus® katetern i urinröret upp till urinblåsan. När urinen börjar rinna, skjuts katetern in lite längre. Håll katetern på plats tills urinen har upphört att flöda. Ta bort katetern genom att dra ut långsamt. Kassera den använda katetern i hushållsavfallet.
- Sortera ytterförpackningen som kartong och lämna till återvinning.

### MATERIAL

Kateter röret	termoplastisk elastomer (TPS-SEBS)
Konnektor	termoplastisk elastomer (TPS-SEBS)
Ytbeläggning	Polyvinylpyrrolidon (PVP), NaCl
Styckförpackningar	Medicinska förpackningar av papper och PVC-fri plast som lämpar sig för EO-sterilisering
Vattenåpse	Vatten i aluminiumpåse
Ytterförpackningar	Kartong

Katetern är latexfri

Katetern är PVC-fri

### VARNINGAR

Anordning endast för engångsbruk och kan inte återanvändas. Måste kasseras efter användning. Använd inte katetern om förpackningen är öppen eller har skadats.

### FÖRVARING

Förvara i rumstemperatur (15-25 °C). Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme och ljus. Hållbarhet 3 (tre) år från steriliseringsdatum.

### STYCKFÖRPACKNING

Styckförpackningen är märkt med storlek, produktnamn och tillverkare.

### AVDELNINGSFÖRPACKNING

Innehåller 30 stycken

Avdelningsförpackning är märkt med produktnamn, storlek, längd, LOT nummer, utgångsdatum, steriliserad med EO, för engångsbruk.

**TILLVERKARE** : ISTEM MEDIKAL Anadolu OSB Mah. 29 Ekim Cad. No:39 Malıköy, Sincan-Ankara/TURKIET

## Beställningsinformation

### Nelaton

Artikelnummer	Beskrivning
<b>15 cm</b>	
HCPPF SN 1508	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 8, 15 cm
HCPPF SN 1510	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 10, 15 cm
HCFFP SN 1512	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 12, 15 cm
HCFFP SN 1514	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 14, 15 cm
<b>20 cm</b>	
HCPPF SN 2006	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 6, 20 cm
HCPPF SN 2008	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 8, 20 cm
HCPPF SN 2010	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch10, 20 cm
HCFFP SN 2012	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 12, 20 cm
HCFFP SN 2014	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 14, 20 cm
HCFFP SN 2016	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 16, 20 cm
HCFFP SN 2018	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 18, 20 cm
<b>30 cm</b>	
HCPPF SN 3006	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 6, 30 cm
HCPPF SN 3008	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 8, 30 cm
HCPPF SN 3010	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 10, 30 cm
HCPPF SN 3012	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 12, 30 cm
<b>40 cm</b>	
HCMPF SN 4006	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 6, 40 cm
HCMPF SN 4008	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 8, 40 cm
HCMPF SN 4010	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch10, 40 cm
HCMPF SN 4012	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch 12, 40 cm
HCMPF SN 4014	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch14, 40 cm
HCMPF SN 4016	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch16, 40 cm
HCMPF SN 4018	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, nelaton, Ch18, 40 cm

### Tiemann

<b>40 cm</b>	
HCTPF SN 4008	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch 8, 40 cm
HCTPF SN 4010	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch10, 40 cm
HCTPF SN 4012	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch 12, 40 cm
HCTPF SN4014	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch14, 40 cm
HCTPF SN4016	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch16, 40 cm
HCTPF SN4018	HomeCath Plus PVC-fri hydrofil tappningskateter med vattenpåse, tiemann, Ch18, 40 cm

30 stycken/förpackningen