




Science.
Applied to Life.™



3M Medical Solutions Division

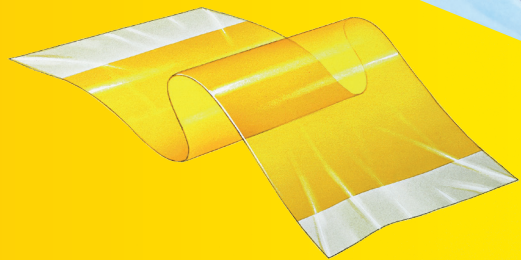

3M™ 6697 Kejsarsnittslakan med 3M™ Ioban™ 2 incisionsfilm

3M™ 6697 Kejsarsnittslakan med 3M™ loban™ 2 incisionsfilm



3M Kejsarsnittslakan 6697 är ett allt-i-ett lakan med loban antimikrobiell incisionsfilm, 360° uppsamlingspåse och slanghållare. Speciallakanet är designat för snabb och enkel applicering samt optimal vätskekontroll. Lakanets totalstorlek är 254 × 307 cm och den kvadratiske incisionsytan 30 × 30 cm. 6697 kejsarsnittslakan finns som enskilt lakan samt i set.

3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Häftämnet är detsamma som gjort Micropore™ tejsen känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning.

3M™ loban™ 2

3M™ loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, en organisk jodförening. Med 3M™ loban™ 2 får du en steril arbetsyta direkt över sårytan genom att incisionsfilmen långsamt och kontrollerat frisätter fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt och den preoperativa hudinfektionen förblir så att bakterienivån på huden hålls låg under längre tid¹.

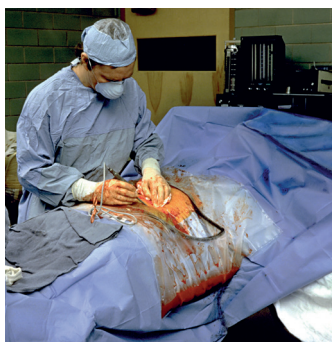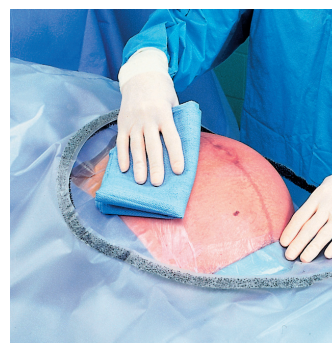

Beställningsinformation

3M art nr	Produktbeskrivning	Antal/lev.förp
6697	Kejsarsnittslakan 254 × 291 cm	5
6697P001	1 st 6697 kejsarsnittslakan 1 st instrumentbordslakan 150 × 200 cm 1 st ass bordspåse 80 × 145 cm 1 st op-tejp 4 st handdukar	10

¹ Fairclough JA et al. The prevention of wound contamination by skin organisms by the pre-operative application of an iodophor plastic adhesive drape. J Int Med Res 1986;14:105-9



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/msd

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2020. Alla rättigheter förbehålls. 18404770_SE20201023 / ht000000938