


Attends® Slip Active



Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens



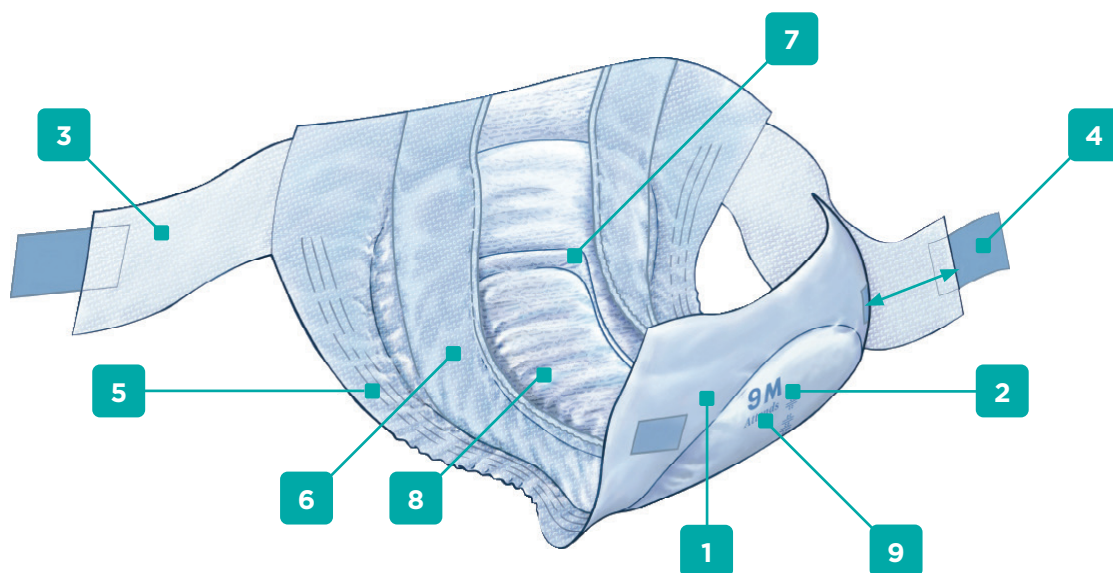



Attends Slip Active är en serie diskreta allt-i-ett skydd utformade för att hantera tung urin- och/eller avföringsinkontinens.



- | | | |
|--|---|--|
| 1 Plastat spärrskikt förhindrar genomvätning. | 2 Våtindikatorn underlättar god omvårdnad och kan användas som en guide för när skyddet behöver bytas. | 3 Andningsbara textillikande sidoband ger en ökad komfort, ökat stöd i midjan samt god hudvård. |
| 4 Återförslutningsbar tvåstegsfixering för enkel montering. Använd den blå positioneringstejpen för att förfixera skyddet och justera om det behövs. Slutfixera sedan med den bredare tejpen. | 5 Mjuk elastik för optimal passform och minskad risk för läckage. | 6 Benelastik reducerar risken för läckage. |
| 7 Anatomiskt utformad kärna för en smidig och komfortabel passform. | 8 Superabsorberande kärna med spridningsskikt för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt. | 9 Information om skyddets storlek och absorptionsnivå finns tryckt på spärrskiktet för enkel hantering av skydden på vårdhem och avdelningar. |

För mer information besök www.attends.se



		Antal/Avd.förp Antal/Trp.förp	Attends Artikelnummer	Höftmått / Midjemått (cm)	Spärskikt	Absorberande kärna	Ytskikt	Andningsbar	Elastik	Läckagebarriärer	Svanecertifierad	Återförlutningsbar fixering	Vikt (gram)	Abs. enligt ISO Rotwell (ml)
8	Attends Slip Active Medium 	28 112	200735	75 - 110	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	79	1820
	Attends Slip Active Large 	28 112	201336	100 - 145	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	95	2110
9	Attends Slip Active Medium 	28 112	201510	75 - 110	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	87	2110
	Attends Slip Active Large 	28 112	201398	100 - 145	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	107	2390
10	Attends Slip Active Medium 	28 112	201411	75 - 110	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	103	2640
	Attends Slip Active Large 	28 56	201435	100 - 145	Polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt Quick-Dry	Non-woven	Ja - Flikar	✓	✓	✓	✓	128	3130

Våra produkter är CE-märkta, latex -och parfymfria



Quick-Dry

Quick-Dry är det spridningsskikt som är placerat direkt under ytskiktet där urinen först når skyddet. Det leder snabbt bort urinen från ytan och ner i skyddets kärna och förhindrar samtidigt återvätning. Det kan hantera flera urintömningar utan att påverka skyddets kapacitet, vilket resulterar i bästa förutsättningen för god hudvård och läckagesäkerhet.



pH Värde

Kärnteknologin med de spiralformade fibrerna i spridningsskiktet hjälper till att garantera ett lågt pH-värde likt hudens naturliga pH. Detta hjälper till att skydda huden och bidra till god hudvård.



Active Zone

Active Zone är ett område centrerat i mitten av skyddet som erbjuder hög absorption där det verkligen behövs. Hög absorption ger torrhet och ökad läckagesäkerhet för användaren.



Naturlig Odour Protection

Naturlig Odour Protection minskar risken för otrevlig lukt.



3023 0086



Attends Slip är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning, vilket visar att produkten är hudvänlig.