


Cytostatika beredning/administrering



Infusionsaggregat för cytostatika, Cyto-Ad Z

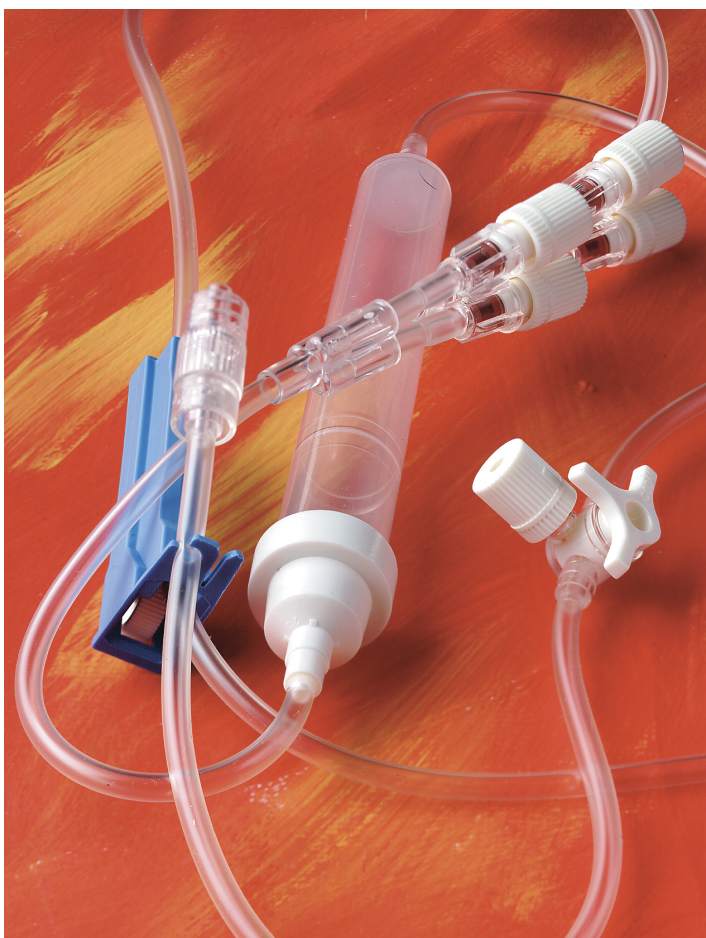

Ett säkert och kostnadseffektivt system för beredning och administrering av cytostatika


Vårt sortiment av produkter för cytostatika- hantering och beredning är speciellt framtaget för att ge en säker och kostnadseffektiv beredning och administrering. Sortimentet innehåller såväl aggregat avsett för gravitation som för infusionspumpar.

Fyllnadsvolymer:

763331: 30,0 ml
763355: 33,0 ml
763606: 33,0 ml
763607: 33,0 ml
763608: 34,0 ml
763609: 2,0 ml
763610: 2,5 ml

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar att Ni får produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Infusionsaggregat för cytostatika, Cyto-Ad Z

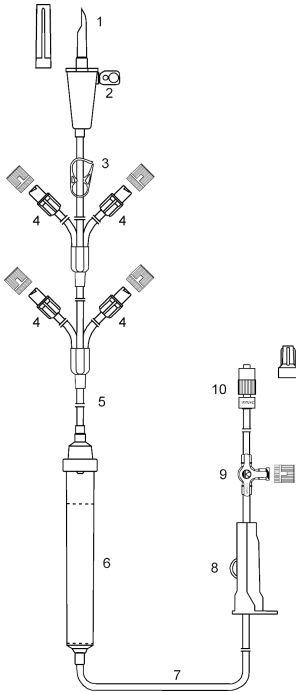

1. Instickspets med skyddshuv säkrar sterilitet av aggregatets insida
2. Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter och backventil som skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen vid övertryck i behållaren. Luckan stängs vid användning av infusionspåsar i plast.
3. Slangklämma för avstängning av vätska från säkerhetsdroppet
4. Luer-Lock koppling med inbyggd backventil, finns i 1-, 2- respektive 4-vägs
5. Slang av PVC NoDEHP, 15 cm, Ø 3,0x4,1 mm
6. Droppkammare, modell lång B 88 med inbyggt 15µ vätskefilter
7. Slang av transparent PVC NoDEHP 175 cm Ø 3,0 x 4,1 mm
8. Droppregulator (blå) - patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av droptakten
9. Trevägskran med inbyggd Takeadapter, flödesventil
10. Luer-Lock, Rullock enligt EN standard med Flowstop förhindrar läckage och garanterar säker och tät koppling till kanyl och kateter

Bruksanvisning:

Utförlig bruksanvisning med bilder, steg-för-steg kan beställas från CODAN Triplus AB, tel: 0300-356 60.

Steriliseringsmetod

EO

EN Standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjuggörare
	Cyto-Ad Z 1-vägs							
763606	Cyto-Ad Z 1 vägs		60	1920	J	N	S	TOTM
763554	Cyto-Ad Z 1 vägs, ljusskyddat NoDEHP		20	720	J	N	S	TOTM
764845	Cyto-Ad Z green line 1 vägs		60	1920	J	J	S	NEJ
	Cyto-Ad Set 2-vägs							
763607	Cyto-Ad Z 2 vägs		60	1920	J	N	S	TOTM
763386	Cyto-Ad Z, 2 vägs, ljusskyddat NoDEHP		60	1920	J	N	S	TOTM
764846	Cyto-Ad Z green line 2 vägs		60	1920	J	J	S	NEJ
	Cyto-Ad Set 4-vägs							
763608	Cyto-Ad Z 4 vägs		60	1920	J	N	S	TOTM
764847	Cyto-Ad Z green line 4 vägs		60	1920	J	J	S	NEJ
	Cyto-Ad Z Greenline för infusionspump 708V							
764848	Cyto-Ad Z green line 2 vägs f 708-pump		60	1920	J	J	S	NEJ
764849	Cyto-Ad Z green line 4 vägs f 708-pump		60	1920	J	J	S	NEJ
	Cyto-Ad Z 4-vägs för infusionspump							
763331	Cyto-Ad Z 4 vägs för IVAC pump		60	1260	J	N	S	TOTM
763355	Cyto-Ad Set 4 vägs för Braun inf.pump		60	1920	J	N	S	TOTM
	Cyto-Ad Z inline till pumpaggregat							
763609	Cyto-Ad Z Inline 2 vägs		60	3780	J	N	S	TOTM
763610	Cyto-Ad Z Inline 4 vägs		60	2160	J	N	S	TOTM
763617	Cyto-Ad Z Inline 4 vägs med droppkammare	100	200	1800	J	N	S	TOTM