


3M Hälsovård

6617, 6619 Vertikallakan med loban 2 incisionsfilm



Förläng din preoperativa huddesinfektion

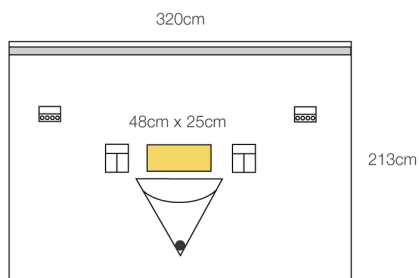

6617, 6619 Vertikallakan med loban 2 incisionsfilm

6617, 6619 vertikallakan med loban 2 antimikrobiell incisionsfilm är allti-i-ett lösningar i två storlekar för höft-/lårbensfrakturer. Speciallakanen är framställda i genomskinligt ogenomträngligt plastmaterial och är enkla att applicera. Uppsamlingspåsen säkerställer god kontroll av blod, kropps- och spolvätskor.

3M

3M loban 2


loban 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, en organisk jodförening. Med loban 2 får du en steril arbetsyta direkt över sårytan genom att incisionsfilmen långsamt och kontrollerat frisätter fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt och den preoperativa huddesinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under längre tid¹.

6617, 6619 Vertikallakan med loban 2 incisionsfilm

6617, 6619 vertikallakan med loban 2 incisionsfilm är allt-i-ett lösningar i två storlekar för höft-/lårbensfrakturer. Speciallakanen är framställda i genomskinligt ogenomträngligt plastmaterial och är enkla att applicera. Uppsamlingspåsen säkerställer god kontroll av blod, kropps- och spolvätskor. Båda lakanen har instrumentpåse och slanghållare på var sida om incisionsytan. Totalstorleken av 6617 och 6619 vertikallakan är 320 x 213 cm resp. 328 x 252 cm och incisionsytan 48 x 25 cm resp. 70 x 32 cm. Lakanen finns så väl lösa som i set.

Beställningsinformation			
Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
6617	Vertikallakan 320 x 213 cm	5	4
6619	Vertikallakan 328 x 252 cm	5	1
6617P001	Vertikallakanset 1 st vertikallakan 6617 loban 1 st instrumentbordslakan, 200 x 150 cm 1 st ass bordspåse 4 st handdukar	18	2
6617P003	Vertikallakanset 1 st vertikallakan 6617 loban 1 st engångsrock L 1 st engångsrock XL 4 st handdukar 1 st instrumentbordslakan, 200 x 150 cm	8	1
6619P002	Vertikallakanset 1 st vertikallakan 6619 1 st häftande op handduk, 90 x 75 cm 1 st ass bordspåse 4 st handdukar 1 st instrumentsbordslakan, 200 x 150 cm	10	1

Material; Polyetylen, polyester (incisionsfilm)
Häftämne; Akrylatbaserat, povidonjod (incisionsfilm)
Tillverkningsland; USA
Hållbarhet; 2 år
Steriliseringmetod; Gammastrålning
Produkterna är CE-märkta och sterila
Förvaring; i normal rumstemperatur

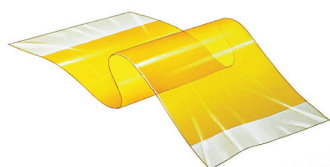


¹ Fairclough JA et al. The prevention of wound contamination by skin organisms by the pre-operative application of an iodophor plastic adhesive drape. J Int Med Res 1986;14:105-9

² Tinker MA et al. Granulomatous peritonitis due to cellulose fibers from disposable surgical fabrics: laboratory investigation and clinical implications. Ann Surg 1974; 180:831-5

³ Yoshimura Y et al. Plastic iodophor drape during liver surgery operative use of the iodophor impregnated adhesive drape to prevent wound infection during high risk surgery. World J Surg 2003; 27:685-8

Applicering av 6617, 6619 Vertikallakan

1.

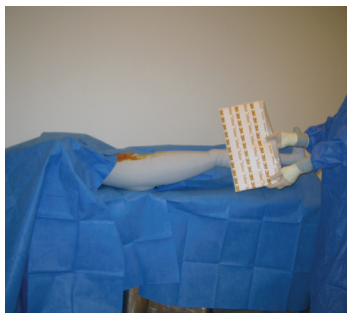

2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.





Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 89
www.3Mhealthcare.se

3M och loban är ett registrerade varumärken hos 3M Company.
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.
©3M 2014. Alla rättigheter förbehålles. PB53 0020-2 SE 140401