

R-lock



R-lock backventil för säker parallelinfusion och enklare infusionsterapi.

Vår unika backventil, R-lock är tillverkad för att förhindra backflöde vid parallelinfusioner.

Minimal begränsning i flöde. Standardiserade kopplingar innebär att den kan anslutas på alla typer av infartsvägar.

Finns även som fast monterad/inbyggd i infusionsaggregat samt i sprutpumpsslang.

Jämn droptakt


Möjlighet att infundera dropp i olika kombinationer

- pumpaggregat/standardaggregat
- standardaggregat/standardaggregat

Oberoende av om det är infusionbehållare av plast eller flaska

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

R-lock

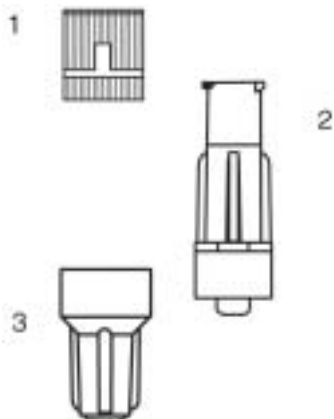

1. Förslutningskork
2. Refluxventil
3. Skyddshätta

Säkerhet

Säker anslutning via luer-lock till infusionskanyler, venkatetrar, 3-vägskranar. Förhindrar backflöde, eliminerar risken för stopp i kanyl/kateter, förhindrar reflux vid injektion av läkemedel. Patienten får hela dosen vid injektionstillfället. R-locken öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde. Om pump används larmar denna omedelbart vid parallell dropp med pumpaggregat/standardaggregat

Materialspecifikation


Skyddshuv: Polyetylen
Refluxventil: Silikon
Konnektor: ABS
Volym: 0,15 ml
Förpackning: Steril peel-pack

Steriliseringsmetod

EO

EN standard

Fyller EN standarder
Märkning EN 980, Luer EN 20594:1

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG  0123

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
165250	R-Lock, backventil R-lock backventil	04:312	150	2400	57600