

Fixeringstejp med mjuk silikon

- Varsam fixering utan strippning av hudceller
- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande
- Idealisk fixering för patienter med skör och känslig hud

Safetac® yta


- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande

Vävd textil

- Formbar
- Enkel att klippa till rätt storlek

Polyuretanfilm


- Andningsbar
- Vattentät

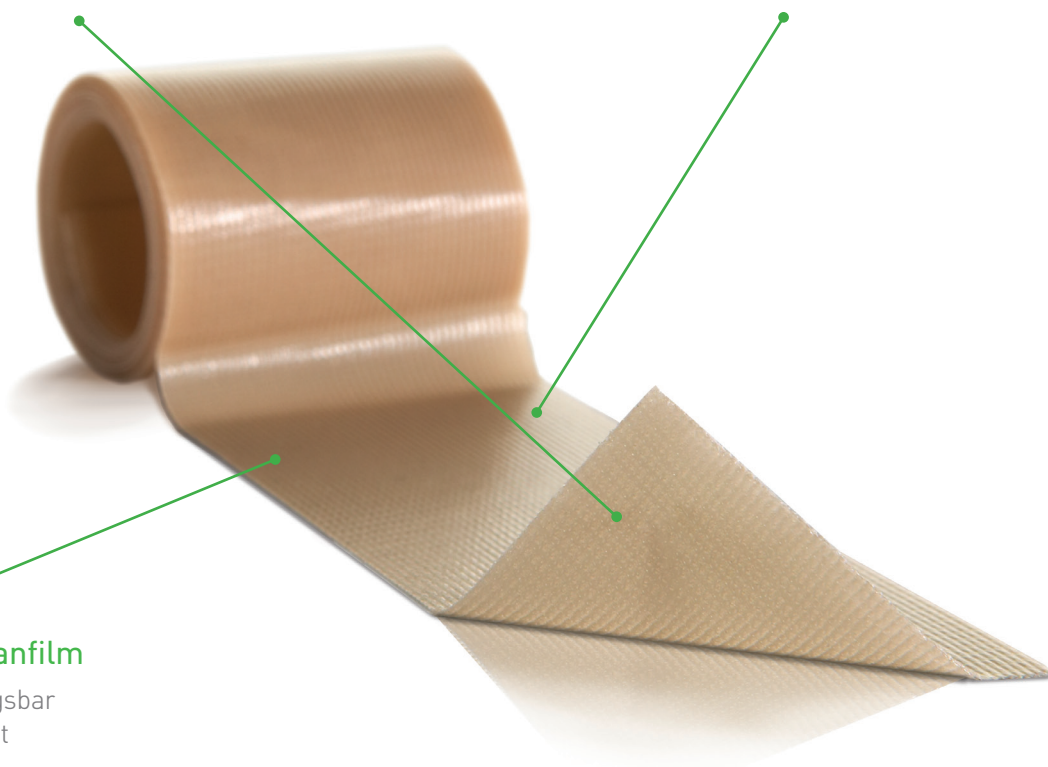


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

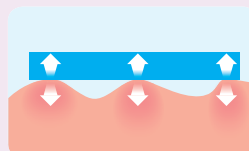


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

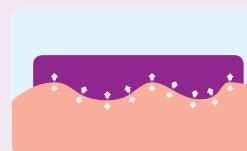


Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


Så här används Mepitac®

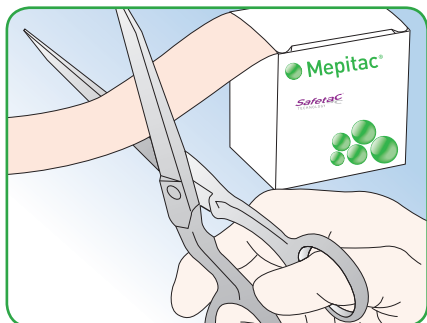

Huden ska vara ren, torr och fri från crème, salva eller dylikt. Vid start av ny förpackning, dra i den gröna markeringen till dess att tejen blir synlig. Klipp därefter till önskad storlek.

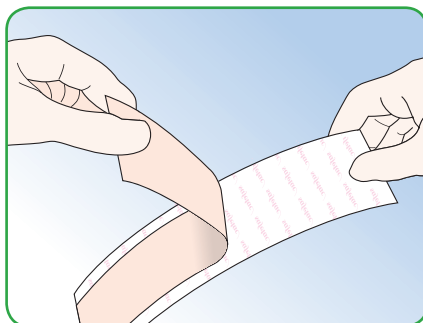

Ta bort skyddsfilm.

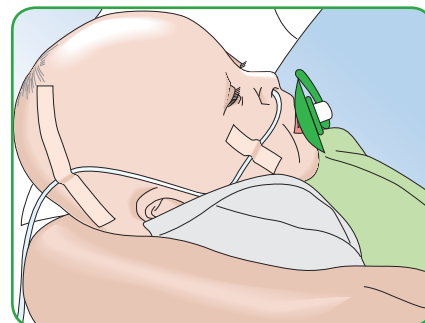

Applicera Mepitac utan att sträcka den. Vid inspektion eller justering kan Mepitac lyftas utan att förlora sina vidhäftande egenskaper.

Så här fungerar Mepitac

Mepitac är en tejp som är mycket behaglig och lätt att ta på och av. Ytan med Safetac ger varsam men säker fixering. Mepitac minskar smärta (även på hårbetäckta områden) och vävnadsskada vid borttagande. Mepitac lämnar inga rester på huden eller på katetrar/slangar. Mepitac är den ideala fixeringen för patienter med skör och känslig hud, allergi eller hudsjukdomar. Mepitac är lämpligt för patienter som kräver varsam applicering och upprepat borttagande av tejp från samma hudområde. Detta kan t. ex. gälla vid neonatalvård eller vård av stomi- och dialyspatienter. Mepitac innehåller inga ämnen som orsakar hudirritation, vilket gör tejen särskilt lämplig för personer som har tendens att få hudreaktioner.

Fördelar med Mepitac

- Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande
- Lämnar inga klisterrester
- Vattentät
- Ångpermeabel
- Anpassas väl till kroppskonturen

Användningsområden


Mepitac är utvecklad för fixering av förband och medicinsk utrustning såsom dräneringskanyler, slangar, sonder, elektroder, och IV kanyler. Dessutom ger Mepitac ett varsamt skydd för huden under t. ex. slangar.

Observera

Mepitac har sämre vidhäftning i fuktig miljö t. ex. i kuvöser och på patienter som svettas mycket. Mepitac är inte lämpligt för fixering av livsuppehållande utrustning. Använd inte Mepitac på arteriella katetrar och kanyler.

Mepitac sortiment

Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
298300	2 cm x 3 m	1	12
298400	4 cm x 1,5 m	1	12

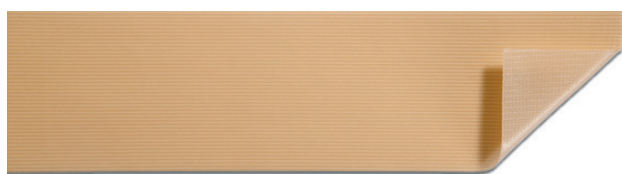

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Tel. 031-722 30 00
www.molnlycke.se
www.molnlycke.se/patient

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepitac® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

