

Aggregat



TUR-aggreat



TUR-aggreat med Y-förgrening, stor transparent droppkammare och maximalt flöde för användning vid urologiska operationer där behov av kraftig spolning kan förekomma.

Våra spolaggreat för per- & postoperativ spolning vid urologiska operationer är tillverkade för att ge maximal säkerhet och enkel hantering.

Stor droppkammare och breda flödeskanaler ger höga flöden utan risk för luftbubblor.


Latexfritt material.

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi och urologi garanterar att Ni får produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Aggregat



TUR-aggregat

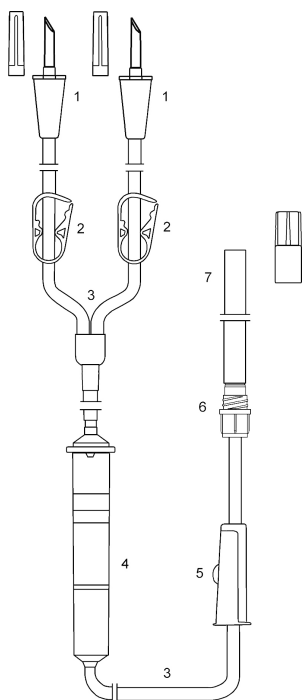

Specifikationer

1. Skyddshuv garanterar steriliteten på aggregatets insida. Insticksspetsar med stor lumen för höga flödes hastigheter
2. Avstängningsklämmor
3. Slang, O 4,8x6,0 mm, total slanglängd för hela systemet; 210 cm
4. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet
5. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
6. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning av anslutnings slang
7. Silikon slang med skyddshuv för anslutning till scopi-instrument

Materialspecifikation

Insticksspetsar: ABS
Avstängningsklämmor: Polypropylen
Slang: PVC OD 7,2mm ID 4,8mm
Droppkammare: Polyamid
Droppregulator: ABS
Skruvkoppling: Polyetylen
Slang: Silikon
Fyllnadsvolym: 56,70 ml

Steriliseringsmetod

EO

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-4.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
763156	TUR-aggregat TUR-spolagg Y-grenad DEHP-fritt		40	1280	J	N	S	TOTM