


Starkt, blått lågluddande

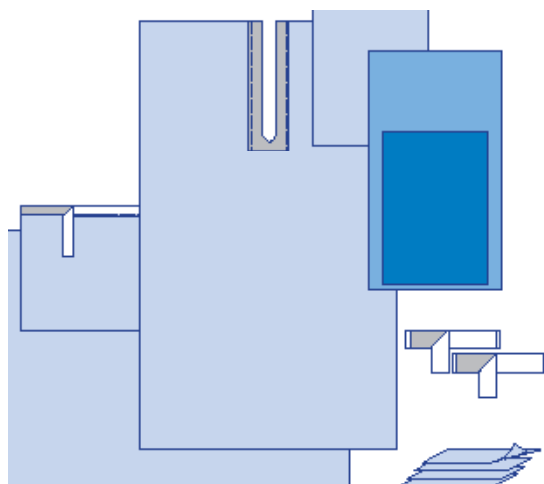

3M ENT-set 9007

3M ENT-set 9007 är framställt i slitstarkt och lågluddande Steri-Drape™ non-woven material. Setet är ett komplett bas set som passar för de flesta typer av öron-, näs-, hals-, plastik- och käkingrepp. Den delade linern på slitslakanet möjliggör enkel applicering. På lakanen kan 3M häftande tillbehörsprodukter så som uppsamlingspåsar, slanghållare och absorptionsdukar fästas, tas bort och återfästas utan att skada det tåliga materialet. Häftämnet är hudvänligt, sitter bra på plats och lämnar inga klisterrester på handskar.


3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret.

Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter 46 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar.

Steri-Drape™ materialet är kompatibelt med häftämnet vilket gör att 3Ms tillbehörprodukter såsom slanghållare, instrumentpåsar och absorptionsdukar kan tas bort och flyttas utan att materialet skadas.

Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär. Materialet består av polypropylen laminerat med polyetylen och är mellanabsorberande, vilket är tillräckligt vid de flesta typer av ingrepp. Vid behov kan det kompletteras med högabsorberande cellulosadukar där det behövs, som kan kastas efter hand. På så vis minimeras ytor med cellulosabasterat material med kortare fibrer, och risken för fibersläpp minimeras. Så får du en renare, tryggare och tåligare drapering.

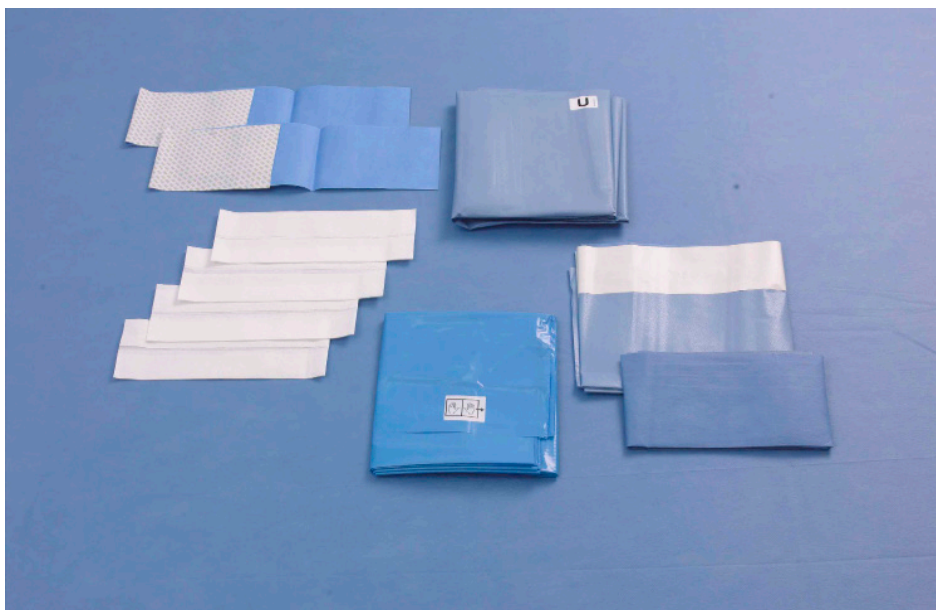

Material; Polypropylen, polyetylen (barriär)
Häftämne; Akrylatbaserat
Tillverkningsland; Mexiko
Hållbarhet; 3 år
Steriliseringsmetod; ETO

Beställningsinformation


Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
9007	1 st häftande slitslakan 250 x 150 cm 1 st häftande op-handduk 100 x 75 cm 1 st instrumentbordslakan 90 x 75 cm 1 st instrumentbordslakan 150 x 200 cm 1 st assbordspåse 80 x 145 cm 2 st op-tejp transparent 10 x 55 cm 4 st torkdukar	8	2

Applicering av 9007 ENT-set


1.



2.

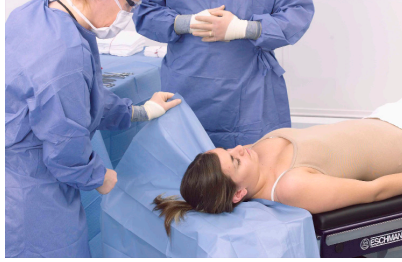


3.

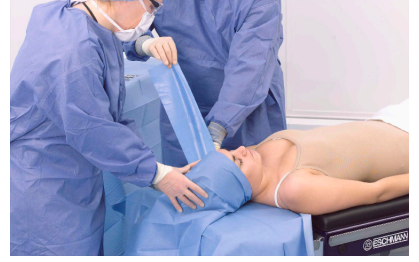


4.



5.

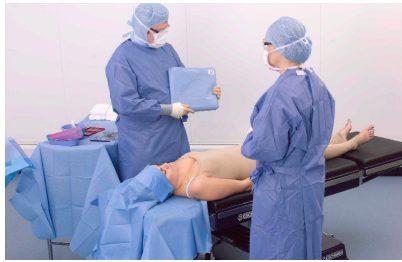

6.

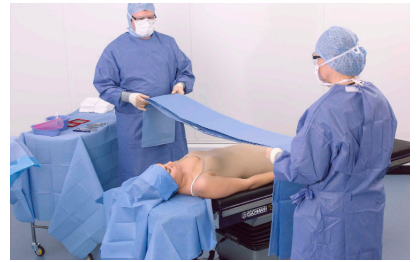

7.



8.



9.



10.



11.



12.





Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se