




Graviditetstest 20IU/L



- Säkert - mer än 99 %
- Snabbt resultat med “Doppa och läs-test”
- Miljövänlig strip
- Känslighet: 20 IU/L
- 25 tester/förpackning i rör

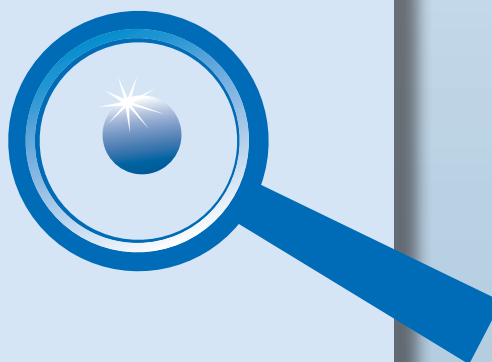



Analyz hCG Strip 20 IU/L


TESTUTFÖRANDE

av **Analyz** hCG Strip Graviditetstest

Analyz hCG Strip är ett graviditetstest med känsligheten 20 IU/L vilket innebär att det kan användas redan 1-2 dagar efter utebliven menstruation. Säkrast resultat erhålles med morgonurin då koncentrationen av hCG är som störst. Urinen samlas i en ren glas- eller plastkopp.

1

Stickan doppas lodrät i urinen och tas upp efter 15 sekunder och lägges plant. OBS! Låt ej urinen nå över linjen märkt "MAX".
Se bilden

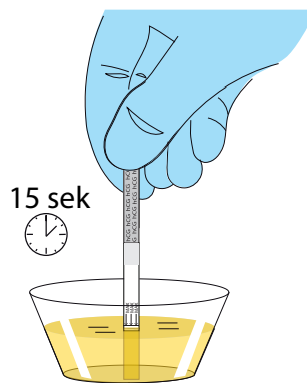

2

Testet avläses efter 3 minuter. Ett positivt svar kan normalt avläsas efter 30-40 sekunder. **OBS! Läs ej efter 10 minuter!**

AVLÄSNING AV TEST


3

Negativ:
En kontrollinje

Positiv:
En kontrollinje och en testlinje

Ogiltig:
Om ingen kontrollinje framträder ska resultatet ej tolkas

Negativa eller tvöksamma testresultat hos patienter som tros vara gravida bör testas om med ett prov taget 48 till 72 timmar senare, helst med morgonurin då hCG-koncentrationen är som högst.

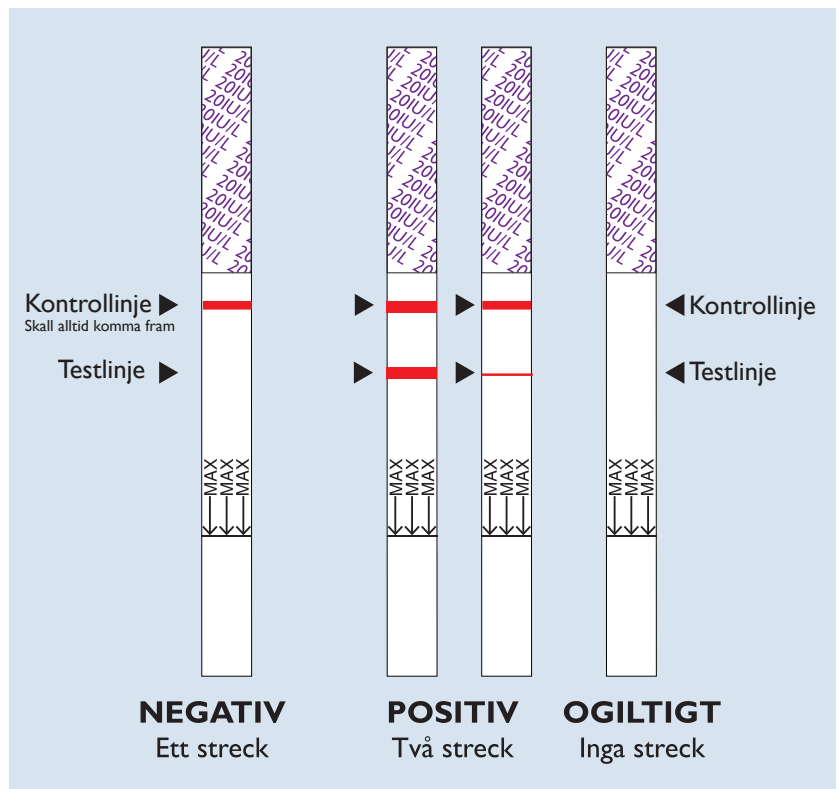

Tillverkare: Hangzhou AllTest Biotech Co. LTD
#550, Yin Hai Street, Hangzhou Economic & Technological
Development Area, Hangzhou -310018, P.R. China
www.alltests.com.cn

Distributör:
abc-Analyz AB
order@abc-analyz.com
info@abc-analyz.com
www.abc-analyz.com