

# Injekt Omnifix<sup>®</sup>

2- och 3-komponentsprutor för engångsbruk



Standard, fingerade och sprutor med kateterfättning för manuellt bruk.

Produktprogram 1 ml till 100 ml.

# Injekt 2 ml - 20 ml, luer- och luerlockfattning

2-komponentsprutor "för miljöns skull"



## Grön kolv

- underlättar avläsningen av uppdragen mängd

## Svart gradering

- för ideal kontrast vid avläsning

## Jämnt glidande kolv

- latexfri
- fri från silikon
- med standard luerfattning eller med centrerad luerlockfattning, speciellt vid cytostatika-användning
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PE



## Högtransparent cylinder

- underlättar kontroll av sprutans innehåll

## Injekt 1 ml med luerfattning 2-komponentspruta, fingraderad



## Injekt-F

- kolven fyller ut luerkonan, vilket reducerar restvolymen och minskar onödiga dosförluster

## Injekt-H

för heparin 10,000 I.U./1 ml  
för heparin 25,000 I.U./1 ml

- speciell gradering för heparin koncentrationer på 10,000 och 25,000 I.U. gör omräkning av doseringsmängderna överflöd



## Utökad skala

- möjliggör avläsning av uppdragen mängd även vid större delvolymer

nominell volym	kan användas upp till
2 ml	3 ml
5 ml	6 ml
10 ml	12 ml
20 ml	24 ml

# Omnifix® 3 ml- 50 ml, med luer- och luerlockfattning

3-komponents standardsprutor "med optimala glidegenskaper"



## Kolv med dubbel tätning-ring

- för noggrann injicering
- kolvstopp som förhindrar att kolven oavsiktligt dras ur cylindern
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

Latexfri



## Standard luerfattning


- 3 ml centrerad, 5-50 ml excentrisk luerfattning



## Färgkodade avdelningsförpackningar

- för snabb bestämning av storleken
  - 3 ml blå
  - 5 ml röd
  - 10 ml orange
  - 20 ml grön
  - 30 ml gul
- 100 st sprutor per förpackning

## Omnifix® 1 ml med luerfattning Fingraderade 3-komponentsprutor

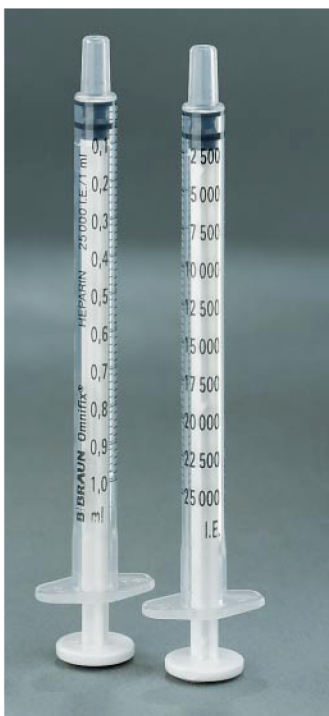

### Omnifix®-F

- exakt dosering vid små volymer

### Omnifix®-H för heparin 10,000 I.U./1 ml för heparin 25,000 I.U./1 ml

- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PS
- tätning av naturgummi

### ■ produktprogram

- Solo - utan kanyl
- Duo - med bipackad kanyl
- Plus - med monterad kanyl

## Omnifix® 50 ml-100 ml, catheter fitting 3-komponents högvolumsprutor



- för sondmatning och spolning
- med centrerad kateterfattning
- med luer-adapter
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

# Produktmodeller

## Sprutor för engångsbruk enligt ISO 7886-1, EO-steriliserade

Injekt	Graderingsintervall	Kona	Luer		Luerlock		Minsta ordervolym (st)
			Art.nr.	Art.nr.	Kona	Art.nr.	
1 ml Injekt-F Solo	0.01 ml	centrerad	916 6017 V				1800 (18 × 100)
1 ml Injekt-H 10 000 I.U. Solo	0.02 ml/200 I.U.	centrerad	916 6106 V				1800 (18 × 100)
1 ml Injekt-H 25 000 I.U. Solo	0.02 ml/500 I.U.	centrerad	916 6254 V				1800 (18 × 100)
			Luer		Luerlock		
		Kona	Art.nr.	Art.nr.	Kona	Art.nr.	
2 ml Injekt (3 ml) Solo	0.1 ml	centrerad	460 6027 V		centrerad	460 6701 V	2500 (25 × 100)
5 ml Injekt (6 ml) Solo	0.2 ml	excentrisk	460 6051 V		centrerad	460 6710 V	2000 (20 × 100)
10 ml Injekt (12 ml) Solo	0.5 ml	excentrisk	460 6108 V		centrerad	460 6728 V	1200 (12 × 100)
20 ml Injekt (24 ml) Solo	1.0 ml	excentrisk	460 6205 V		centrerad	460 6736 V	800 ( 8 × 100)
med kanyl:			Luer		Sterican* kanyl*)		
		Kona	Art.nr.	Art.nr.	strl/mm	Gauge	
1 ml Injekt-F Duo	0.01 ml	centrerad	916 6033 V		- /0.50 × 16	25 G × 5/8"	1800 (18 × 100)
2 ml Injekt (3 ml) Duo	0.1 ml	centrerad	464 5022 V		14/0.60 × 30	23 G × 1 1/4"	2500 (25 × 100)
5 ml Injekt (6 ml) Duo	0.2 ml	excentrisk	464 5057 V		12/0.70 × 30	22 G × 1 1/4"	2000 (20 × 100)
10 ml Injekt (12 ml) Duo	0.5 ml	excentrisk	464 5103 V		2/0.80 × 40	21 G × 1 1/2"	1200 (12 × 100)
20 ml Injekt (24 ml) Duo	1.0 ml	excentrisk	464 5200 V		2/0.80 × 40	21 G × 1 1/2"	800 ( 8 × 100)

Omnifix®	Graderingsintervall	Kona	Luer		Luerlock		Minsta ordervolym (st)
			Art.nr.	Art.nr.	Kona	Art.nr.	
1 ml Omnifix®-F Solo	0.01 ml	centrerad	916 1406 V				1800 (18 × 100)
1 ml Omnifix®-H 10 000 I.U. Solo	0.02 ml/200 I.U.	centrerad	916 2909 V				1800 (18 × 100)
1 ml Omnifix®-H 25 000 I.U. Solo	0.02 ml/500 I.U.	centrerad	916 2607 V				1800 (18 × 100)
			Luer		Luerlock		
		Kona	Art.nr.	Art.nr.	Kona	Art.nr.	
3 ml Omnifix Solo	0.1 ml	centrerad	461 6025 V		centrerad	461 7022 V	2500 (25 × 100)
5 ml Omnifix Solo	0.2 ml	excentrisk	461 6057 V		centrerad	461 7053 V	2000 (20 × 100)
10 ml Omnifix Solo	0.5 ml	excentrisk	461 6103 V		centrerad	461 7100 V	1200 (12 × 100)
20 ml Omnifix Solo	1.0 ml	excentrisk	461 6200 V		centrerad	461 7207 V	800 ( 8 × 100)
30 ml Omnifix Solo	1.0 ml	excentrisk	461 6308 F		centrerad	461 7304 F	600 ( 6 × 100)
50 ml Omnifix (60 ml) Solo	1.0 ml	excentrisk	461 6502 F		centrerad	461 7509 F	100 ( 1 × 100)
med kanyl:			Luer		Sterican* kanyl*)		
		Kona	Art.nr.	Art.nr.	strl/mm	Gauge	
1 ml Omnifix -F Duo	0.01 ml	centrerad	916 1465 V		- /0.50 16	25 G × 5/8"	1800 (18 × 100)
3 ml Omnifix Duo	0.1 ml	centrerad	464 3100 V		14/0.60 30	23 G × 1 1/4"	** (25 × 100)
5 ml Omnifix Duo	0.2 ml	excentrisk	464 3119 V		12/0.70 30	22 G × 1 1/4"	** (20 × 100)
10 ml Omnifix Duo	0.5 ml	excentrisk	464 3127 V		2/0.80 40	21 G × 1 1/2"	** (12 × 100)
20 ml Omnifix Duo	1.0 ml	excentrisk	464 3135 V		2/0.80 40	21 G × 1 1/2"	** ( 8 × 100)
					Kateterfättning		
					Kona	Art.nr.	
50 ml Omnifix (60 ml) Solo	1.0 ml				centrerad	461 0067 F	100 ( 1 × 100)
50 ml Omnifix (60 ml) Solo	1.0 ml	med lueradapter och aspirationsgrepp			centrerad	461 3554 F	100 ( 1 × 100)
100 ml Omnifix Solo	2.0 ml	med lueradapter och aspirationsgrepp			centrerad	461 4003 F	100 ( 1 × 100)

\*) Ytterliggare sprut- och kanylkombinationer på förfrågan.

\*\*) Vid förfrågan.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box 110  
Svärdvägen 21  
182 12 Danderyd

Tel 08-634 34 00  
Fax 08-634 34 34