

# Prevalon

## Tryckavlastande stövel



**Förebygger trycksår på hälen, droppfot/spetsfot samt utåtrotation av benet.**

- ✓ Prevalon gör så att hälen svävar fritt och håller hälen fri från tryck.
- ✓ Prevalon håller foten i en upprätt position och motverkar droppfot/spetsfot.
- ✓ Med hjälp av kilen så hålls benet i en naturlig position och motverkar även slitage på Peroneus-nerven som kan leda till försämrad rörlighet i foten och droppfot.

Artikel	Artikelnr
Prevalon Standard	7300-X
Prevalon Standard med integrerad kil	7355-X
8 St/kartong	



**Jämförelse för att visa trycket på hälen genom att ha hälen direkt på sängen eller att ha hälen i Prevalon tryckavlastande stövel.**

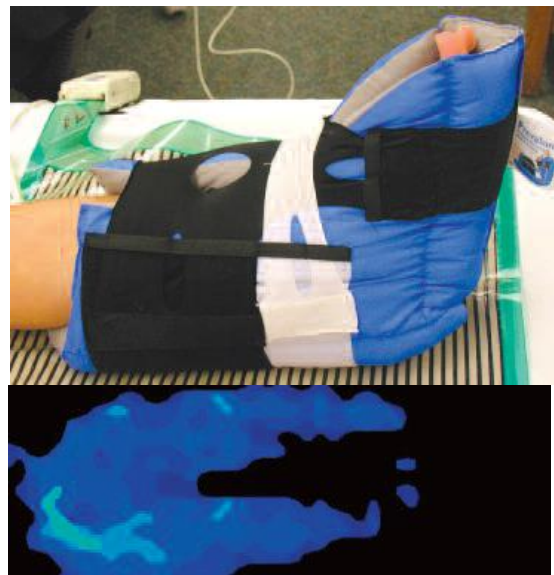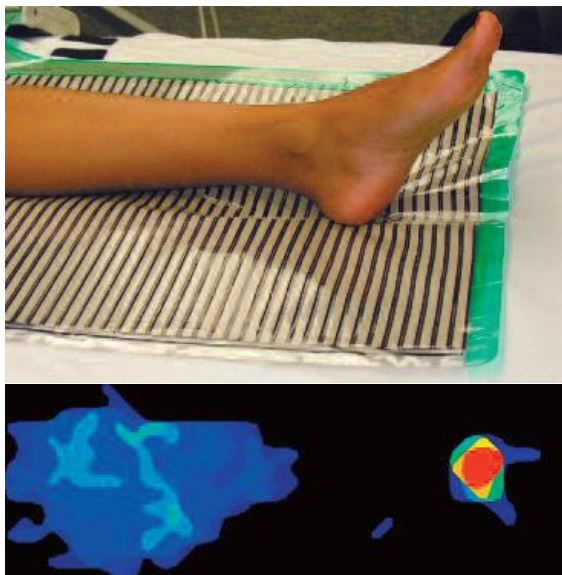

1.

1. Comparison of unprotected heels on a hospital bed vs. heels positioned in the Prevalon® Pressure Relieving Heel Protector.  
Lead Researcher: Tamara Reid Bush, Ph.D.  
Michigan State University Biomechanical Design and Research Laboratory, September 2009

# Techno Medica AB

Krossgatan 15, 162 50 Vällingby Tel 08-754 00 30 Fax 08 – 380199

E-mail: [info@technomedica.se](mailto:info@technomedica.se) [www.technomedica.se](http://www.technomedica.se)

<b>Prevalon tryckavlastande stövel med integrerad kil.</b>	<b>Egenskaper</b>	<b>Fördelar</b>
	<b>Kudd-liknande fiberfyllning med cylinderformade sektioner.</b>	Ger god komfort och en stabil grund. Håller foten på plats i stöveln.
	<b>Elastiska remmar till undersidan av foten.</b>	Ger maximalt stöd för undersidan av foten för att förhindra plantarflexion vilket kan leda till droppfot.
	<b>Öppen, svävande-häl design.</b>	Avlastar hälen helt. Tillåter god överblick över hälen.
	<b>Mjuk komfort-grip insida.</b>	Minimerar friktion och förskjutning samtidigt som det håller foten på plats. Ventilering material ger god luftcirkulation.
	<b>Elastiska stora remmar på ovansidan av benet.</b>	Stora remmar utan vassa kanter eller irriterande flikar. Gör det snabbt och enkelt att justera för en säker, komfortabel passform.
	<b>Ingångar för kompressionshjälpmedel.</b>	Förhindrar att hårda plasttuber trycker på huden.
	<b>Utsida i nylon.</b>	Förflyttar friktionen från hälen till sängen. Glider lätt över underlaget och tillåter god rörlighet.
	<b>Integrerad kil.</b>	Förebygger utåtrotation av benet vilket kan skada Peroneus-nerven och orsaka droppfot.

# Tvättråd

## Prevalon® Hälskydd

- Stöveln går bra att sprita eller torka av på utsidan.
- Stöveln kan tvättas i maskin, rekommenderat 60°C.
- Använd alltid tvättpåse/örngott att lägga stöveln i vid tvätt. (1 stövel/påse).
- Se till att fästa spandexbanden innan tvätt.
- Torktumling rekommenderas ej.
- Låt stöveln lufttorka.

